



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
72336 Balingen-Frommern  
Germany

**www.kern-sohn.com**

+0049-[0]7433-9933-0

+0049-[0]7433-9933-149

info@kern-sohn.com

# Gebbruiksaanwijzing Tafelweegschaal

## KERN FCB

Type TFCB-A  
TFCB-B

Versie 1.4

2024-05

NL



TFCB-A\_TFCB-B-BA-nl-2414



# KERN FCB

Versie 1.4 2024-05

## Gebruiksaanwijzing Tafelweegschaal

---

---

### Inhoudsopgave

1	Technische gegevens .....	5
2	Conformiteitverklaring .....	8
3	Overzicht van het toestel.....	9
3.1	Elementen .....	9
3.2	Bedienelementen.....	10
3.2.1	Toetsenbordoverzicht.....	10
3.2.2	De waarde numeriek invoeren.....	11
3.2.3	Overzicht van de aanduidingen .....	11
4	Basisopmerkingen (algemene informatie).....	12
4.1	Beoogd gebruik .....	12
4.2	Afwijkend gebruik .....	12
4.3	Garantie.....	12
4.4	Toezicht over de controlemiddelen.....	13
5	Veiligheidsrichtlijnen.....	13
5.1	Richtlijnen van de gebruiksaanwijzing nakomen .....	13
5.2	Personeelscholing .....	13
6	Vervoer en opslag.....	13
6.1	Controle bij ontvangst.....	13
6.2	Verpakking / retourvervoer .....	13
7	Uitpakken, installeren en in werking stellen .....	14
7.1	Plaats van installatie en gebruikslocatie .....	14
7.2	Uitpakken en controle.....	15
7.3	Installatie, opstellen en waterpas zetten.....	15
7.4	Netwerkvoeding.....	16
7.5	Bedrijf met de accuvoeding (optioneel) .....	16
7.5.1	De accu opladen .....	17
7.6	Randapparatuur aansluiten .....	18
7.7	Eerste inbedrijfstelling .....	18
7.8	Justeren.....	18

7.8.1	Extern justeren < CAL E H E >.....	19
7.8.2	Extern justeren met gebruik van een door de gebruiker gedefinieerd justergewicht < CAL E U D >.....	20
7.8.3	Constante van de zwaartekracht op het justeerpunt < G R A A D J >.....	22
7.8.4	Constante van de zwaartekracht op de installatieplaats < G R A U S E >.....	23
8	IJking.....	24
9	Basismodus .....	26
9.1	Aan-/uitzetten .....	26
9.2	Gewoon wegen .....	26
9.3	Op nul zetten .....	27
9.4	Tarreren.....	27
9.5	Wijzigingstoets en F toets (standaardinstellingen) .....	28
9.5.1	Omschakelen van de weegeenheid.....	29
9.5.2	Brutto waarde van de massa aflezen .....	30
9.5.3	Instellingen van PRE-Tare functie openen .....	30
9.5.4	Data-Hold functie uitvoeren.....	30
10	Bedieningsconcept .....	31
11	Toepassing <Wegen>.....	33
11.1	Toepassings specifieke instellingen .....	33
11.2	PRE-Tare .....	35
11.2.1	Geplaatste massa als PRE-TARE overnemen .....	35
11.2.2	Bekende tarra numeriek invoeren.....	36
11.3	Functie "Data Hold" .....	36
11.4	Weegeenheden.....	37
11.4.1	De weegeenheid instellen .....	37
11.4.2	Weging met vermenigvuldigingsfactor met een toepassing eenheid <FFA>....	38
11.4.3	Percentageweging met toepassing-eenheid <%>.....	38
12	Toepassing <Tellen> .....	39
12.1	Toepassings specifieke instellingen .....	39
12.2	Toepassing gebruiken .....	40
12.2.1	Stukken tellen .....	40
12.2.2	Doeltellen .....	43
13	De toepassing <Controlewegen>.....	46
13.1	Toepassings specifieke instellingen .....	46
13.2	Toepassing gebruiken .....	47
13.2.1	Doelwegen .....	47
13.2.2	Controlewegen.....	50

14	Menu.....	52
14.1	Navigatie in het menu.....	52
14.2	Menu van de toepassing .....	52
14.3	Configuratiemenu .....	53
14.3.1	Overzicht configuratiemenu <ⓁⓔⓈⓅ> .....	53
15	Communicatie met randapparatuur via KUP aansluiting .....	63
15.1	KERN Communications Protocol (interfaceprotocol van KERN) .....	64
15.2	Alibi geheugen van KERN.....	65
15.3	Functies voor gegevensoverdracht .....	66
15.3.1	Optelmodus <ⓁⓂⓂ> .....	66
15.3.2	Gegevensoverdracht nadat PRINT <ⓂⓂⓂⓂⓂ> wordt ingedrukt .....	68
15.3.3	Automatische gegevensoverdracht <ⓂⓂⓂⓂ> .....	69
15.3.4	Continue gegevensuitvoer <ⓂⓂⓂⓂ> .....	69
15.4	Gegevensformaat.....	70
16	Onderhoud, werkprestatie, verwijderen .....	71
16.1	Reinigen .....	71
16.2	Onderhoud, werkprestatie .....	71
16.3	Verwijderen .....	71
17	Hulp bij kleine storingen.....	72
18	Foutmeldingen.....	73

## 1 Technische gegevens

KERN	FCB 6K-5	FCB 12K-4	FCB 30K-4
Artikelnummer / type	TFCB 6K-5-A	TFCB 12K-4-A	TFCB 30K-4-A
Afreesbaarheid ( <i>d</i> )	0,05 g	0,1 g	0,2 g
Weegbereik ( <i>Max.</i> )	6000 g	12 kg	30 kg
Reproduceerbaarheid	0,05 g	0,1 g	0,2 g
Liniariteit	±0,15 g	±0,3 g	±0,6 g
Duur van signaaltoename (typisch)	2 s		
Minimaal gewicht van een element bij bepaling van het aantal stuks in laboratoriumomstandigheden*	50 mg	100 mg	200 mg
Minimaal gewicht van een element bij bepaling van het aantal stuks in laboratoriumomstandigheden*	500 mg	1 g	2 g
Justeerpunten	2 kg/4 kg/6 kg	2 kg/5 kg/10 kg/12 kg	10 kg/20 kg/30 kg
Aanbevolen justiegewicht (klasse), buiten leveringsbereik	6 kg (F2)	12 kg (F2)	20 kg (F1) / 10 kg (F1)
Opwarmingstijd	2 h		
Weegeenheden	g, kg, lb, gn, dwt, oz, ozt, pcs, FFA, %		
Luchtvochtigheid	max. 80% relatief (geen condensatie)		
Toegestane omgevingstemperatuur	0°C ... +40°C		
Ingangsspanning van het apparaat	5,9 V, 1 A		
Ingangsspanning van de netadapter	AC 100–240 V; 50/60 Hz;		
Bedrijf met accuvoeding (optie)	bedrijfstijd 48 h (verlichte achtergrond uit) bedrijfstijd 24 h (verlichte achtergrond aan) oplادتijd ca. 8 h		
Automatisch uitschakelen (accu)	keuzemogelijkheid: 30 s, 1/2/30/60 min		
Afmetingen van de behuizing	322 × 267 × 103 (B × D × H) [mm]		
Weegschaalplateau, edelstaal	252 × 225 (S × G) [mm]		
Netto gewicht (kg)	3,25		
Interfaces	RS-232 (optioneel), Ethernet (optioneel), Bluetooth BLE (v4.0) (optioneel), USB-Device (optioneel), WLAN (optioneel) met KUP aansluiting		

<b>KERN</b>	<b>FCB 6K-3DM</b>	<b>FCB 15K-3DM</b>	<b>FCB 30K-3DM</b>
Artikelnummer / type	TFCB 6K-3DM-A	TFCB 15K-3DM-A	TFCB 30K-3DM-A
Afreesbaarheid ( <i>d</i> )	1 g/2 g	2 g/5 g	5 g/10 g
Weegbereik ( <i>Max.</i> )	3000 g/6000 g	6 kg/15 kg	15 kg/30 kg
Reproduceerbaarheid	1 g/2 g	2 g/5 g	5 g/10 g
Liniariteit	±1 g/2 g	±2 g/5 g	±5 g/10 g
Duur van signaaltoename (typisch)	2 s		
Ijkeenheid ( <i>e</i> )	1 g/2 g	2 g/5 g	5 g/10 g
IJkklassse	III	III	III
Minimaal gewicht ( <i>Min</i> )	20 g	40 g	100 g
Minimaal gewicht van een element bij bepaling van het aantal stuks in laboratoriumomstandigheden*	200 mg	500 mg	1 g
Minimaal gewicht van een element bij bepaling van het aantal stuks in laboratoriumomstandigheden*	2 g	5 g	10 g
Opwarmingstijd	10 min		
Weegeenheden	kg, g		
Luchtvochtigheid	max. 80% relatief (geen condensatie)		
Toegestane omgevingstemperatuur	0°C ... +40°C		
Ingangsspanning van het apparaat	5,9 V, 1 A		
Ingangsspanning van de netadapter	AC 100–240 V; 50/60 Hz;		
Bedrijf met accuvoeding (optie)	bedrijfstijd 48 h (verlichte achtergrond uit) bedrijfstijd 24 h (verlichte achtergrond aan) oplaadtijd ca. 8 h		
Automatisch uitschakelen (accu)	keuzemogelijkheid: 30 s, 1/2/30/60 min		
Afmetingen van de behuizing	322 x 267 x 103 (B x D x H) [mm]		
Weegschaalplateau, edelstaal	252 x 225 (S x G) [mm]		
Netto gewicht (kg)	3,25		
Interfaces	RS-232 (optioneel), Ethernet (optioneel), Bluetooth BLE (v4.0) (optioneel), USB-Device (optioneel), WLAN (optioneel) met KUP aansluiting		

<b>KERN</b>	<b>FCB 8K0.1</b>	<b>FCB 12K1</b>	<b>FCB 30K1</b>
Artikelnummer / type	TFCB 8K-4-B	TFCB 12K-3-B	TFCB 30K-3-B
Afreesbaarheid ( <i>d</i> )	0,1 g	1 g	1 g
Weegbereik ( <i>Max.</i> )	8 kg	12 kg	30 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 g	1 g	1 g
Liniariteit	± 0,3 g	± 3 g	± 3 g
Duur van signaaltoename (typisch)	2 s		
Minimaal gewicht van een element bij bepaling van het aantal stuks in laboratoriumomstandigheden*	100 mg	1 g	1 g
Minimaal gewicht van een element bij bepaling van het aantal stuks in laboratoriumomstandigheden*	1 g	10 g	10 g
Justeerpunten	2 kg / 5 kg / 8 kg	4 kg / 8 kg / 12 kg	10 kg / 20 kg / 30 kg
Aanbevolen justiegewicht (klasse), buiten leveringsbereik	1 kg (F1) / 2 kg (F1) / 5 kg (F1)	12 kg (M1)	30 kg (F2)
Opwarmingstijd	120 min	30 min	120 min
Weegeenheden	g, kg, lb, gn, dwt, oz, ozt, pcs, FFA, %		
Luchtvochtigheid	max. 80% relatief (geen condensatie)		
Toegestane omgevingstemperatuur	0°C ... +40°C		
Ingangsspanning van het apparaat	5,9 V, 1 A		
Ingangsspanning van de netadapter	AC 100–240 V; 50/60 Hz;		
Bedrijf met accuvoeding (optie)	bedrijfstijd 48 h (verlichte achtergrond uit) bedrijfstijd 24 h (verlichte achtergrond aan) oplaadtijd ca. 8 h		
Automatisch uitschakelen (accu)	keuzemogelijkheid: 30 s, 1/2/30/60 min		
Afmetingen van de behuizing	322 x 267 x 103 (B x D x H) [mm]		
Weegschaalplateau, edelstaal	252 x 225 (S x G) [mm]		
Netto gewicht (kg)	3,8	3,0	3,8
Interfaces	RS-232 (optioneel), Ethernet (optioneel), Bluetooth BLE (v4.0) (optioneel), USB-Device (optioneel), WLAN (optioneel) met KUP aansluiting		

**\* Minimaal gewicht van afzonderlijk element bij bepaling van het aantal stuks in laboratoriumomstandigheden:**

- Er zijn ideale omgevingscondities voor het bepalen van het aantal stuks met hoge resolutie
- Geen gewichtsverdeling van getelde delen

**\*\* Minimaal gewicht van een element bij bepaling van het aantal stuks in normale omstandigheden:**

- Er zijn onrustige omgevingsomstandigheden (wind, trillingen)
- Er bestaat gewichtsverdeling van de getelde delen

## **2 Conformiteitverklaring**

De geldende EG-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de website:

[www.kern-sohn.com/ce](http://www.kern-sohn.com/ce)



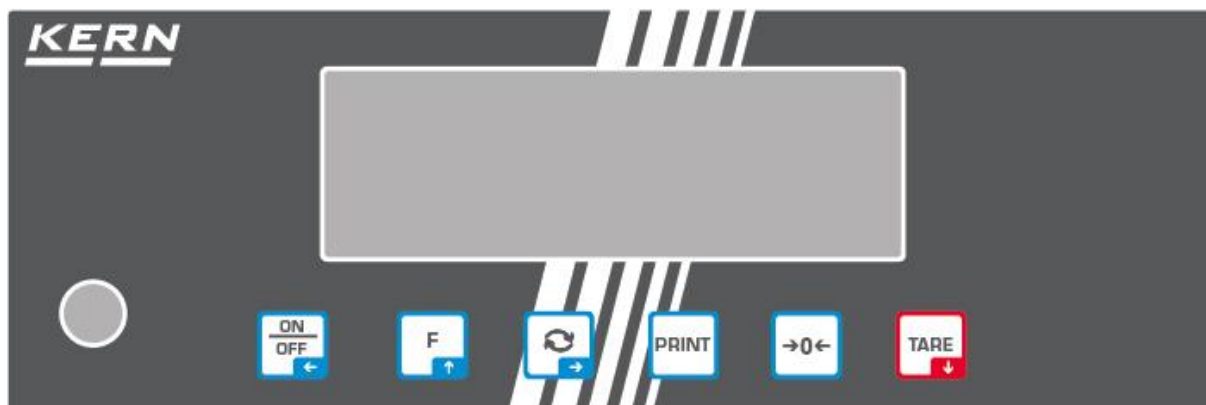
### 3 Overzicht van het toestel

#### 3.1 Elementen









Pos.	Naam	Pos.	Naam
1	Weegschaalplateau	6	KUP aansluiting (KERN Universal Port)
2	Afreesinrichting	7	Aansluiting voedingseenheid
3	Toetsenbord	8	Voet met verstelbare schroef
4	Libel (waterpas)	9	Vervoerbeveiliging
5	Contact voor diefstalbeveiliging	10	Batterijcontainer




## 3.2 Bedienelementen



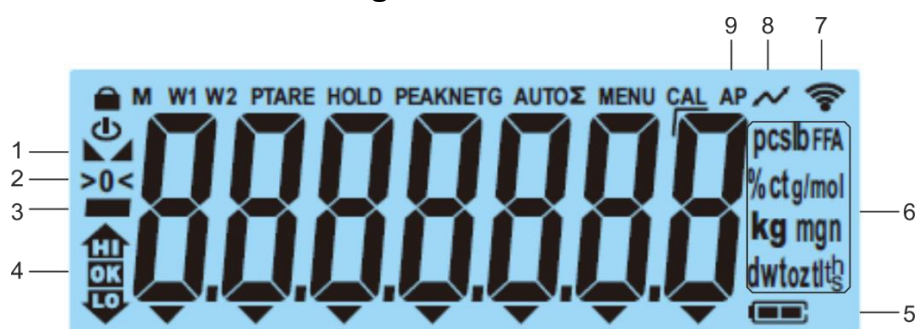
### 3.2.1 Toetsenbordoverzicht








Toets	Naam	Functie in bedrijfsmodus	Functie in het menu
	ON/OFF toets	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aan-/uitzetten (toets indrukken en ingedrukt houden)</li> <li>➤ Achtergrondverlichting van het scherm aan-/uitzetten (toets indrukken)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Navigatietoets ←</li> <li>➤ Terug naar het vorige menuniveau</li> <li>➤ Het menu verlaten / terug naar de weegmodus</li> </ul>
	TARE toets	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tarreren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menu opvragen (op de toets drukken en ingedrukt houden)</li> <li>➤ Navigatietoets ↓</li> <li>➤ Keuze van de menupunt</li> </ul>
	ZERO toets	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Op nul zetten</li> </ul>	
	F toets	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Functietoets, zie hoofdstuk 9.5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Navigatietoets ↑</li> <li>➤ Keuze van de menupunt</li> </ul>
	Toets ↻	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Toets voor omschakelen, zie hoofdstuk 9.5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Navigatietoets →</li> <li>➤ Menupunt activeren</li> <li>➤ De keuze bevestigen</li> </ul>
	PRINT toets	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Overdracht van de weeggegevens via interface</li> </ul>	

### 3.2.2 De waarde numeriek invoeren

Toets	Naam	Functie
	Navigatietoets →	Cijferkeuze De ingevoerde gegevens bevestigen. Meerdere malen op de toets voor elke positie drukken. Wachten tot het invoervenster met numerieke waarden verschijnt.
	Navigatietoets ↓	De waarde van het blinkende cijfer verminderen (0–9)
	Navigatietoets ↑	De waarde van het knipperende cijfer vergroten (0–9)

### 3.2.3 Overzicht van de aanduidingen



Positie	Aanduiding	Beschrijving
1		Stabilisatieaanduiding
2		Nulaanduiding
3		Aanduiding van de negatieve waarde
4		Tolerantie-markeringen voor weging met een tolerantiebereik
5		Indicator laadstatus batterij
6	<b>Indicator eenheden / Pcs / %</b>	Keuzemogelijkheid: g, kg, lb, gn, dwt, oz, ozt of Toepassingspictogram [ <b>Pcs</b> ] bij het bepalen van aantal stuks of [%] bij het bepalen van percentwaarde
7		WiFi-pictogram
8		Gegevensoverdracht in uitvoering
9	<b>AP</b>	Functie "Autoprint" actief
-	<b>G</b>	Indicator bruto - gewichtswaarde
-	<b>NET</b>	Indicator netto - gewichtswaarde
-	<b>Σ</b>	De weeggegevens zijn in het optelgeheugen

## **4 Basisopmerkingen (algemene informatie)**

### **4.1 Beoogd gebruik**

De door u aangekochte weegschaal dient ter bepaling van het gewicht (de weegwaarde) van het gewogen materiaal. Ze dient als een "niet automatische weegschaal" te worden beschouwd, d.w.z. dat het gewogen materiaal voorzichtig handmatig in het midden van het weegschaalplateau dient te worden geplaatst. De weegwaarde kan na de stabilisatie worden afgelezen.

### **4.2 Afwijkend gebruik**

- Onze weegschalen zijn geen automatische weegschalen en worden niet voor dynamische wegingen gebruikt. Toch, na controle van het individuele gebruiksbereik en de speciale nauwkeurigheidseisen van de hier genoemde toepassing, kunnen de weegschalen ook voor dynamische wegingen worden gebruikt.
- Het weegschaalplateau niet aan langdurige belasting blootstellen. Dit kan leiden tot beschadiging van het meetmechanisme.
- Stoten en overbelasting van de weegschaal boven aangegeven maximale last (*Max.*), met bestaande tarravoortrek, absoluut mijden. Het kan tot de beschadiging van het weegschaal leiden.
- Gebruik de weegschaal nooit in een gevaarlijke omgeving. De serie-uitvoering is geen explosiebestendige uitvoering.
- De weegschaal mag niet op constructieve wijze worden gewijzigd. Dit kan leiden tot de weergave van onjuiste meetresultaten, veiligheidsgebreken of vernietiging.
- De weegschaal mag alleen overeenkomstig de beschreven specificaties worden gebruikt. Andere gebruiksbereiken / toepassingsgebieden vereisen schriftelijke toestemming van de firma KERN.

### **4.3 Garantie**

De garantie vervalt ingeval van:

- het niet naleven van onze richtsnoeren zoals in de gebruiksaanwijzing bepaald;
- gebruik buiten de beschreven toepassingen;
- wijziging of opening van het toestel;
- mechanische beschadiging of door werking van media, vloeistoffen en natuurlijk verbruik;
- onjuiste opstelling of elektrische installatie;
- overbelasting van het meetmechanisme.

#### 4.4 Toezicht over de controlemiddelen

In het kader van kwaliteitssysteem dienen regelmatig technische meeteigenschappen van de weegschaal en eventueel beschikbare controlegewichten te worden gecontroleerd. De verantwoordelijke gebruiker moet hiervoor een geschikt interval als ook het type en de omvang van deze controle vaststellen. Informatie betreffende toezicht over controlemiddelen zoals weegschalen als ook over noodzakelijke controlegewichten zijn toegankelijk op de website van de firma KERN ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)). De controlegewichten en de weegschalen kan men snel en goedkoop laten ijkken (kalibreren) in een ijkinglaboratorium van de firma KERN geaccrediteerd (terugzetten naar de norm geldende in bepaald land).

### 5 Veiligheidsrichtlijnen

#### 5.1 Richtlijnen van de gebruiksaanwijzing nakomen



⇒ Lees deze gebruiksaanwijzing vóór de installatie en inbedrijfstelling zorgvuldig door, ook als u al ervaring heeft met KERN-weegschalen.

#### 5.2 Personeelscholing

Het apparaat mag enkel door opgeleide medewerkers worden bediend en onderhouden.

### 6 Vervoer en opslag

#### 6.1 Controle bij ontvangst

Controleer onmiddellijk na ontvangst van het pakket of er geen zichtbare beschadigingen aanwezig zijn - hetzelfde betreft het toestel na het uitpakken.

#### 6.2 Verpakking / retourvervoer



- ⇒ Bewaar alle onderdelen van de originele verpakking voor eventueel retourvervoer.
- ⇒ Gebruik alleen de originele verpakking voor het retourvervoer.
- ⇒ Ontkoppel alle aangesloten kabels en losse/verplaatsbare onderdelen vóór verzending.
- ⇒ Maak eventuele transportsloten weer vast, indien beschikbaar.
- ⇒ Alle delen, bv. het windscherm, het weegschaalplateau, de netadapter, e.d. dienen tegen wegglijden en beschadiging te worden beveiligd.

## 7 Uitpakken, installeren en in werking stellen

### 7.1 Plaats van installatie en gebruikslocatie

De weegschalen zijn ontworpen om betrouwbare weegresultaten onder normale gebruiksomstandigheden te garanderen.

De keuze van de juiste locatie voor de weegschaal verzekert een nauwkeurige en snelle werking.

#### **Op de plaats van installatie moet het volgende in acht worden genomen:**

- Plaats de weegschaal op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Extreme temperaturen als ook temperatuurverschillen bij bv. plaatsing in de buurt van de verwarmingsbronnen of op plaatsen met directe werking van zonnestralen vermijden.
- Bescherm de weegschaal tegen directe tocht door open ramen en deuren.
- Vermijd trillingen tijdens het wegen.
- Bescherm de weegschaal tegen hoge vochtigheid, dampen en stof.
- Stel het toestel niet gedurende lange tijd bloot aan hoge vochtigheid. Niet toegestane condensatie (condensatie van vocht op het apparaat) kan optreden als een koud apparaat in een veel warmere omgeving wordt gebracht. In dat geval moet het van het net gescheiden apparaat ca. 2 uur bij kamertemperatuur acclimatiseren.
- Elektrostatische ladingen mijden die van het gewogen materiaal en van de weegschaalcontainer komen.
- Het apparaat niet in gebieden gebruiken met explosiegevaar of in gebieden waar gevaar bestaat voor explosie van gassen, dampen, nevels en stoffen!
- Weg van chemische middelen (bv. vloeistoffen of gassen) houden die agressief op de interne en externe weegschaaloppervlaktes kunnen uitwerken en deze beschadigen.
- Bij optreden van elektromagnetische velden, statische ladingen als ook instabiele elektrische voeding zijn grote onregelmatigheden in weergave mogelijk (foutief weegresultaat als ook schade van de weegschaal). Men dient in dat geval de weegschaal te verplaatsen of de storingsbron verwijderen.

## 7.2 Uitpakken en controle

Het apparaat en de onderdelen uit de verpakking afnemen, het verpakkingsmateriaal verwijderen en op de daarvoor voorziene werkplaats plaatsen. Controleer of alle onderdelen van de leveringsomvang aanwezig en onbeschadigd zijn.

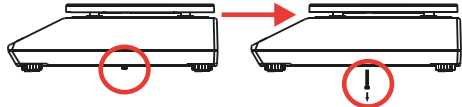
Leveringsomvang / serietoebehoren:

- Weegschaal, zie hoofdstuk 3.1
- Netadapter
- Gebruiksaanwijzing
- Afdekkap
- Inbussleutel

## 7.3 Installatie, opstellen en waterpas zetten

⇒ Vervoerbeveiliging verwijderen.

**⚠ CAUTION / ACHTUNG ⚠**




**E** Remove transportation locking screw(s) on the bottom side before powering up and start using this product. Be aware: Not removing the screw(s) will ultimately lead to incorrect weighing results.

**D** Entfernen Sie die Transportsicherungsschraube(n) von der Unterseite vor Einschalten und Inbetriebnahme des Produkts. Beachten Sie: Wenn Sie die Schraube(n) nicht entfernen, führt dies zu inkorrekten Wäageergebnissen.

⇒ Instaleer weegschaalplateau en indien nodig windbescherming.

⇒ De weegschaal op een effen oppervlakte plaatsen.

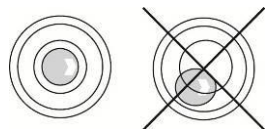⇒ Stel de weegschaal met de voetschroeven waterpas totdat de luchtbel in de waterpasindicator zich in de gemarkeerde zone bevindt.



⇒ Controleer regelmatig dat ze waterpas is.

## 7.4 Netwerkvoeding



De landspecifieke stekker kiezen en in de netadapter steken.



Controleer dat de voedingspanning van de weegschaal correct is ingesteld. De weegschaal kan aan het voedingsnetwerk enkel dan worden aangesloten indien de gegevens op het toestel (sticker) en de lokale voedingspanning identiek zijn.

Gebruik enkel originele netadapters van de firma KERN. Gebruik van andere producten vereist de toestemming van de firma KERN.



### Belangrijk:

- Vóór het starten de netkabel op beschadigingen controleren.
- De netadapter mag geen contact met vloeistoffen hebben.
- De stekker moet altijd bereikbaar zijn.

## 7.5 Bedrijf met de accuvoeding (optioneel)

### LET OP



- ⇒ De accu en de lader zijn compatibel. Enkel de met de weegschaal geleverde netadapter gebruiken.
- ⇒ De weegschaal niet tijdens het opladen gebruiken.
- ⇒ Vervang de accu enkel door een accu van hetzelfde type of van het door de fabrikant aanbevolen type.
- ⇒ De accu is niet beschermd tegen alle omgevingsinvloeden. Blootstelling van de accu aan bepaalde omgevingsomstandigheden kan tot brand of explosie leiden. Het kan leiden tot ernstig letsel aan personen of schade aan eigendommen.
- ⇒ Bescherm de accu tegen vuur en hitte.
- ⇒ Laat de accu niet in contact met vloeistoffen, chemicaliën of zouten.
- ⇒ Stel de accu niet bloot aan hoge druk of magnetronstraling.
- ⇒ Breng in geen geval wijzigingen aan en bewerk niet met de accu en de lader.
- ⇒ Gebruik geen defecte, beschadigde of vervormde accu.
- ⇒ Verbind of kortsluit de elektrische contacten van de accu niet met metalen voorwerpen.
- ⇒ Elektrolyt kan uit een beschadigde accu lekken. Contact van de elektrolyt met de huid of de ogen kan tot irritatie leiden.
- ⇒ Let bij het plaatsen of vervangen van accu's op de juiste polariteit (zie informatie in het batterijvakje).
- ⇒ Door de netadapter aan te sluiten wordt de accu uitgeschakeld. Bij gebruik op netvoeding moet de batterij worden verwijderd als



	<p>de weging langer dan 48 uur duurt! (Gevaar van oververhitting).</p> <p>⇒ Indien wordt geconstateerd dat de accu een geur afgeeft, verhit, verkleurd of vervormd is, moet ze onmiddellijk van de stroomvoorziening worden losgekoppeld en indien mogelijk, van de weegschaal.</p>
--	---

### 7.5.1 De accu opladen

**De accu (optie) wordt met behulp van de meegeleverde netadapter opgeladen.**

Vóór het eerste gebruik moet de accu met het netsnoer minstens 15 uur worden opgeladen.

Om de batterij in het menu te besparen (zie hoofdstuk 14.3.1) kan de functie van automatisch uitzetten <  $\text{AutoFF}$  > worden geactiveerd.

Wanneer de accu leeg wordt, verschijnt het symbool <  $\text{LowBat}$  >. Om de accu op te laden, het netsnoer zo snel mogelijk aansluiten. 30 uur, de oplaadtijd totdat de accu opnieuw vol is bedraagt ca.

## 7.6 Randapparatuur aansluiten

Vóór aansluiten of afkoppelen van extra apparatuur (printer, computer) aan/van het gegevensinterface dient de weegschaal noodzakelijk van netwerk te worden gescheiden.

Uitsluitend accessoires en randapparatuur van de firma KERN met de weegschaal gebruiken, optimaal aan de weegschaal aangepast.

## 7.7 Eerste inbedrijfstelling

Om precieze weegresultaten met behulp van elektronische weegschalen te krijgen, dient de weegschaal een juiste werkingstemperatuur te bereiken (zie "Opwarmingstijd", hoofdstuk 1). De weegschaal moet gedurende deze opwarmtijd op de stroomvoorziening (netaansluiting, accu of batterij) zijn aangesloten en ingeschakeld.

De nauwkeurigheid van de schaal hangt af van de plaatselijke zwaartekrachtversnelling.

De aanwijzingen in het hoofdstuk "Justeren" absoluut opvolgen.

## 7.8 Justeren

Omdat de waarde van de valversnelling niet op elke plek op aarde gelijk is, dient elke weegschaal aangepast te worden - conform de weegregel voortvloeiende uit regels van natuurkunde - aan de valversnelling op de plaats van installatie van de weegschaal (enkel indien de weegschaal niet eerder in fabriek is gejusteerd op de plaats van installatie). Een dergelijke justeerprocedure moet worden uitgevoerd bij de eerste ingebruikneming, na elke verandering van plaats en bij schommelingen van de omgevingstemperatuur. Om nauwkeurige meetresultaten te verzekeren wordt het aanvullend aanbevolen om de weegschaal ook cyclisch in de weegmodus te justeren.

- i** • Indien mogelijk het justeren met het justergewicht doorvoeren waar het gewicht van gelijk is aan de maximale belasting van de weegschaal (aanbevolen justersgewicht, zie hoofdstuk 1). Het is ook mogelijk het justeren met de gewichten van andere nominale waarden of tolerantieklassen door te voeren, het is maar niet optimaal voor wat betreft de meettechniek. De nauwkeurigheid van het justergewicht moet gelijk zijn aan de basisleesbaarheid [**d**] van de weegschaal, en beter, als het een beetje hoger is.  
Gegevens over de controlegewichten zijn te vinden op: <http://www.kern-sohn.com>
- Zorg voor stabiele omgevingsomstandigheden. Voor de stabilisatie is de opwarmingstijd vereist (zie hoofdstuk 1).
- Zorg ervoor dat zich op het weegplateau geen voorwerpen bevinden.
- Trillingen en tocht vermijden.
- Het justeren enkel bij opgelegd standaard weegschaalplateau uitvoeren.
- Bij weegschalen met typeonderzoek is het justeren geblokkeerd.

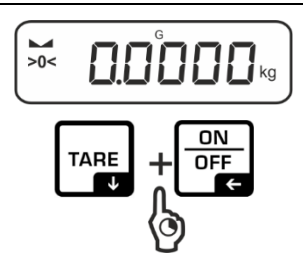







Om de toegangsblokkering op te heffen moet het zegelmerk worden vernietigd


en de instelschakelaar worden bediend. De plaatsing van de justeertoets, zie hoofdstuk 8.

**Let op:**

Nadat de zegel wordt verbroken en voordat de weegschaal opnieuw wordt gebruikt in toepassingen die de ijking vereisen, dient de weegschaal opnieuw te worden geijkt door een bevoegde genotificeerde instelling en betreffend te worden gemarkeerd met een nieuwe zegel.


**7.8.1 Extern justeren < cALeHt >**

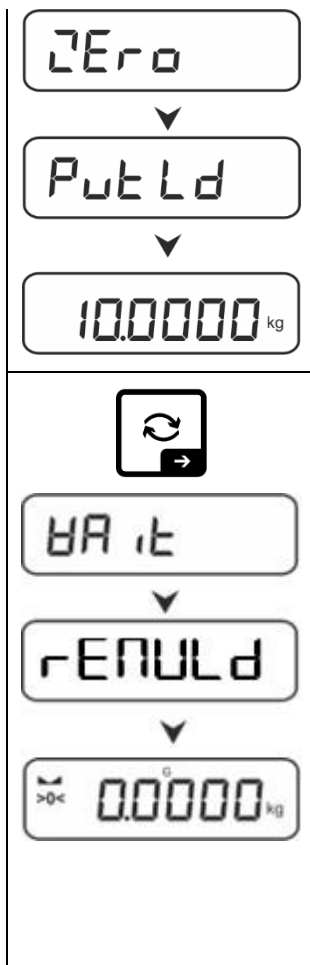	<p>⇒ Om configuratiemenu op te vragen tegelijk op <b>TARE</b> en <b>ON/OFF</b> drukken en ingedrukt houden.</p>
	<p>⇒ Afwachten tot het eerste menupunt &lt; cAL &gt; wordt weergegeven.</p>
	
	<p>⇒ Met → bevestigen, de aanduiding &lt; cALeHt &gt; verschijnt.</p>
	
	<p>⇒ Druk de toets →, wordt het eerste instelbare justeergewicht weergegeven.</p>
	
	<p>⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ het justeergewicht kiezen, zie hoofdstuk 1 „Justeerpunten” of „Aanbevolen justeergewicht”.</p>
	<p>⇒ Vereist justeergewicht voorbereiden.</p>
	<p>⇒ De keuze met de toets → bevestigen. De volgende aanduidingen &lt; cErO &gt; en &lt; P t L d &gt; worden weergegeven en vervolgens verschijnt de waarde van het justeersgewicht dat op de weegschaal moet worden geplaatst.</p>




- ⇒ Plaats het justergewicht en bevestig door op **→** te drukken, er worden **< HA it >** en **< rENULd >** weergegeven.
- ⇒ Nadat **< rENULd >** is weergegeven het justergewicht verwijderen.
- ⇒ Na succesvol justeren wordt de weegschaal automatisch terug naar de weegmodus gezet. Bij fout van het justeren (bv. wanneer zich op de weegschaal voorwerpen bevinden) verschijnt op de afleeseenheid een foutmelding **< Er ong >**. De weegschaal uitzetten en het justeerproces herhalen.

### 7.8.2 Extern justeren met gebruik van een door de gebruiker gedefinieerd justergewicht **< cAL Eud >**

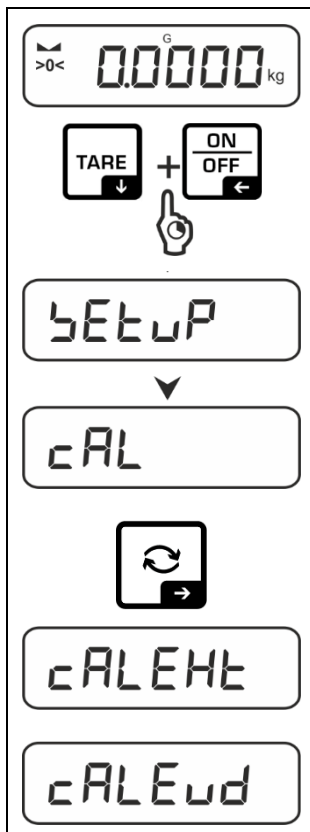

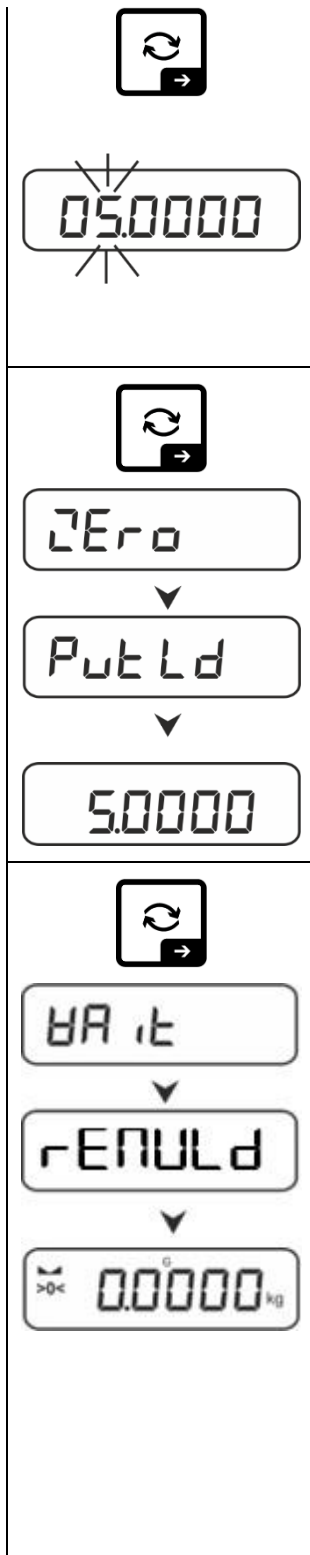- ⇒ Om configuratiemenu op te vragen tegelijk op **TARE** en **ON/OFF** drukken en ingedrukt houden.
- ⇒ Afwachten tot het eerste menupunt **< cAL >** wordt weergegeven.
- ⇒ Met **→** bevestigen, de aanduiding **< cALEHt >** verschijnt.
- ⇒ Met de navigatietoetsen **↓↑** het menupunt **< cALEud >** kiezen.



- ⇒ Met de toets → bevestigen. Het wordt een invoervenster met numerieke waarden weergegeven, waarin de waarde van het justeergewicht kan worden ingevoerd. De actieve positie knippert.
- ⇒ Bereid het justeergewicht voor.
- ⇒ Voer de gewichtswaarde in, voor numeriek invoeren zie hoofdstuk 3.2.2.

- ⇒ De keuze met de toets → bevestigen. De volgende aanduidingen < Zero > en < Put Ld > worden weergegeven en vervolgens verschijnt de waarde van het justeergewicht dat op de weegschaal moet worden geplaatst.

- ⇒ Plaats het justeergewicht en bevestig door op → te drukken, er worden < HARit > en < rENULd > weergegeven.

- ⇒ Nadat < rENULd > is weergegeven het justeergewicht verwijderen.

- ⇒ Na succesvol justeren wordt de weegschaal automatisch terug naar de weegmodus gezet. Bij fout van het justeren (bv. wanneer zich op de weegschaal voorwerpen bevinden) verschijnt op de afleeseenheid een foutmelding < Error >. De weegschaal uitzetten en het justeerproces herhalen.

### 7.8.3 Constante van de zwaartekracht op het justeerpunt < GrAADJ >



⇒ Om configuratiemenu op te vragen tegelijk op **TARE** en **ON/OFF** drukken en ingedrukt houden.

⇒ Afwachten tot het eerste menupunt < CAL > wordt weergegeven.

⇒ Met → bevestigen, de aanduiding < CALEHT > verschijnt.

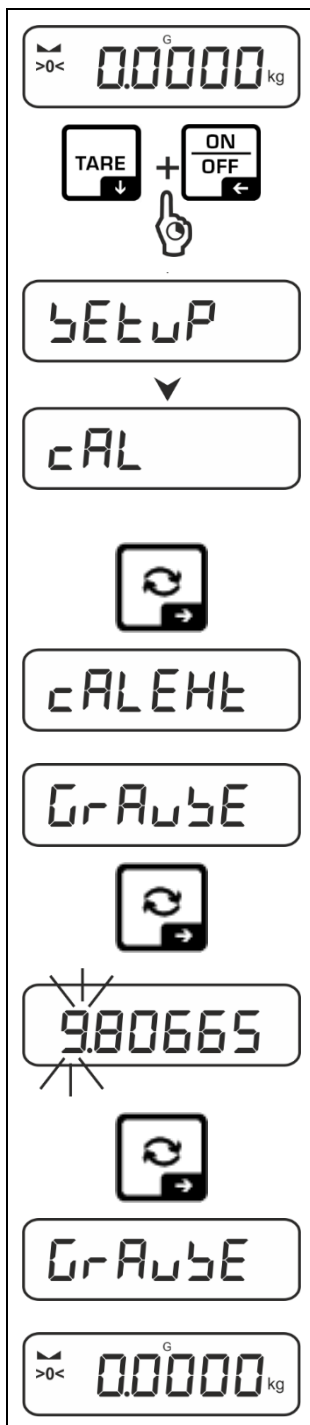
⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ het menupunt < GrAADJ > kiezen.

⇒ Met de toets → bevestigen, de actuele instelling wordt weergegeven. De actieve positie knippert.

⇒ Voer de gewichtswaarde in en bevestig met de toets →, het invoeren van de numerieke waarden zie hoofdstuk 3.2.2.  
De weegschaal wordt opnieuw naar het menu omgeschakeld.

⇒ Om het menu te verlaten op ← meermaals drukken.

#### 7.8.4 Constante van de zwaartekracht op de installatieplaats < GrAUbE >



⇒ Om configuratiemenu op te vragen tegelijk op **TARE** en **ON/OFF** drukken en ingedrukt houden.

⇒ Afwachten tot het eerste menupunt < **CAL** > wordt weergegeven.

⇒ Met **→** bevestigen, de aanduiding < **CALEHT** > verschijnt.

⇒ Met de navigatietoetsen **↓↑** het menupunt < **GrAUbE** > kiezen.

⇒ Met de toets **→** bevestigen, de actuele instelling wordt weergegeven. De actieve positie knippert.

⇒ Voer de gewichtswaarde in en bevestig met de toets **→**, het invoeren van de numerieke waarden zie hoofdstuk 3.2.2.  
De weegschaal wordt opnieuw naar het menu omgeschakeld.

⇒ Om het menu te verlaten op **←** meermaals drukken.

## 8 IJking

### Algemeen:

Volgens de EU-richtlijn 2014/31/EU moeten weegschalen worden geijkt indien ze als volgt worden gebruikt (door de wet bepaalde omvang):

- in het economisch verkeer, als de prijs van een product door de weging ervan wordt bepaald;
- bij bereidingen van medicijnen in apotheken als ook bij analyses in medische en farmaceutische laboratoria;
- voor officiële doeleinden;
- bij vervaardiging van verpakkingen.

Bij twijfels de plaatselijke Instantie voor Maten en Gewichten raadplegen.

Weegschalen die binnen het wettelijk bepaalde gebied (-> geijkte weegschalen) in de geldigheidsduur van de ijking worden gebruikt, moeten de grensfouten van de gebruikte weegschalen handhaven - ze zijn in de regel gelijk aan tweemaal de waarden van de grensfouten van de toelaatbare weegschaalaanduidingen tijdens de ijking.

Na het verstreken van de geldigheidsperiode van de ijking moet een nieuwe ijking worden uitgevoerd. Het justeren van de weegschaal nodig voor de nieuwe ijking om de grensfouten van de toegestane weegschaalaanduidingen tijdens de ijking te handhaven, valt niet onder de garantie.

### Opmerkingen betreffende de ijking:

De weegschalen die in de technische gegevens voor ijken geschikt zijn, zijn met een EU typeonderzoek voorzien. Als de weegschalen worden gebruikt voor wettelijke metrologie, zoals hierboven beschreven, moeten ze worden geijkt en regelmatig opnieuw worden geijkt.

De nieuwe ijking van een weegschaal wordt uitgevoerd volgens de geldende wettelijke voorschriften van de landen. Bv. in Duitsland duurt de ijkinggeldigheidsperiode in de regel 2 jaar.

De voorschriften van het land van gebruik moeten worden nageleefd!

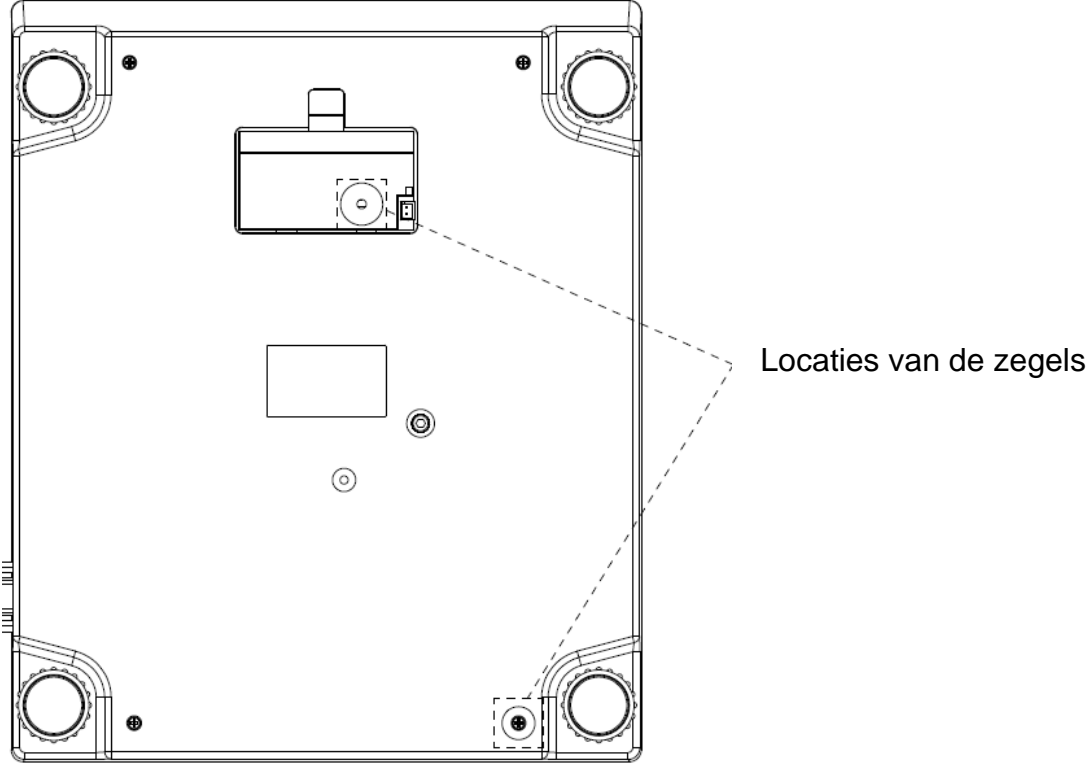


#### **De ijking van de weegschaal is ongeldig zonder de zegelmerken.**

Bij weegschalen met typetoelating informeren de daarop geplaatste zegels dat de weegschaal geopend en onderhouden mag worden enkel door geschoold en bevoegd vakpersoneel. Het vernielen van de zegels betekent dat de ijking niet meer geldig is. De landelijke wetten en voorschriften opvolgen. In Duitsland is een nieuwe ijking vereist.




**Plaatsing van de zegels:**



## 9 Basismodus


### 9.1 Aan-/uitzetten
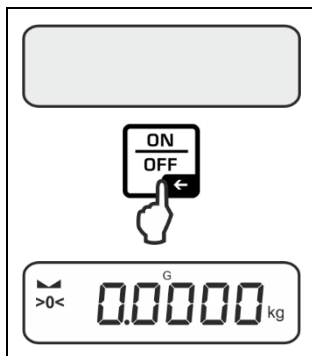
#### Aanzetten:




- ⇒ De toets **ON/OFF** drukken.  
Nadat de display wordt aangezet, wordt de autotest van de weegschaal doorgevoerd.  
Afwachten tot de gewichtsaanduiding verschijnt.  
De weegschaal is paraat met de laatste actieve toepassing.

#### Uitzetten:

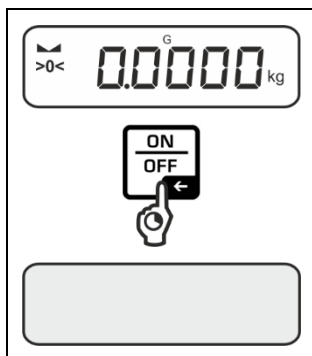

- ⇒ De toets **ON/OFF** drukken en ingedrukt houden tot de display verdwijnt.

### 9.2 Gewoon wegen

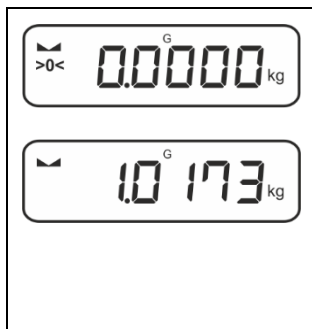

- ⇒ De weergave van de nulaanduiding [**>0<**] controleren, indien nodig op nul zetten door op **ZERO** te drukken.
- ⇒ Het te wegen materiaal opleggen.
- ⇒ Afwachten tot de stabilisatieaanduiding (▮) wordt weergegeven.
- ⇒ Het weegresultaat aflezen.

#### **i** Waarschuwing voor overbelasting


Overbelasting van de weegschaal boven aangegeven maximale last (*Max*) met bestaande tarravoortrek, absoluut vermijden.  
Het kan tot de beschadiging van het apparaat leiden.  
Het overschrijden van de maximale last wordt met de aanduiding  $\overline{\text{---}}$  gesignaleerd. De weegschaal ontlasten of de initiële belasting verminderen.




## 9.5 Wijzigingstoets en F toets (standaardinstellingen)

Aan de toets voor omschakelen en F toets kunnen verschillende functies worden toegewezen.

Standaard (< dEFAULt >) zijn in de toepassingen van de weegschaal volgende functies toegewezen:

	De toets drukken	De toets drukken en ingedrukt houden
BE ih	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Voor het eerst indrukken: De weegeenheid instellen</li> <li>➤ Tussen weegeenheden omschakelen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Brutto waarde van de massa aflezen</li> </ul>
count	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Voor het eerst indrukken: Aantal referentiestuks instellen</li> <li>➤ Tussen weegeenheden omschakelen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nadat de weegschaal wordt getarreerd en de toets ingedrukt, wordt de gewichtseenheid weergegeven, door de toets ingedrukt te houden kan het display tussen bruto, netto en tarra schakelen.</li> </ul>
chEcH	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Voor het eerst indrukken: De weegeenheid instellen</li> <li>➤ Tussen weegeenheden omschakelen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nadat de weegschaal wordt getarreerd en de toets ingedrukt, wordt de gewichtseenheid weergegeven, door de toets ingedrukt te houden kan het display tussen bruto, netto en tarra schakelen.</li> </ul>

	De toets drukken	De toets drukken en ingedrukt houden
BE ih	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Instellingen van PRE-Tare functie openen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Data-Hold functie uitvoeren</li> </ul>
count	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aantal referentiestuks instellen</li> </ul>	<b>Geen toegewezen functie</b>
chEcH	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ De instellingen voor controlewegen openen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ De instelling voor doelwegen openen</li> </ul>

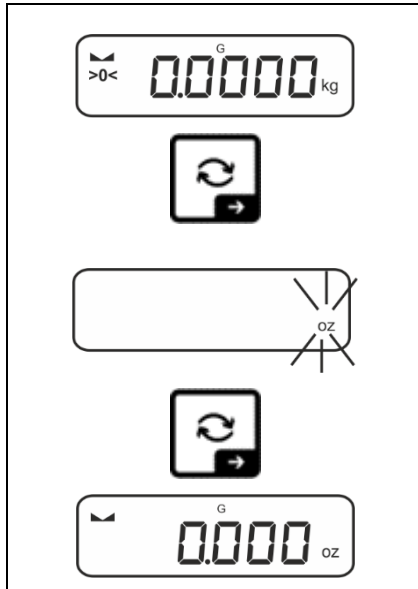
**i** Overige instellingen zijn beschikbaar in het configuratiemenu in het submenu < bUtton >, zie hoofdstuk 14.3.1.


Hieronder worden de standaardinstellingen (< dEFAULt >) voor de toepassing <Wegen> omgeschreven.


### 9.5.1 Omschakelen van de weegeenheid

Standaard is de toets zo ingesteld dat door het **indrukken** op de toets tussen de weegeenheden kan worden omgeschakeld.

#### Eenheid activeren:





Bij de eerste keer indrukken van de toets  kan de eenheid voor de snelkeuze worden ingesteld.

⇒ Op de toets  drukken en afwachten tot de aanduiding knippert.


⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de weegeenheid kiezen en met de toets → bevestigen.

#### Eenheid omschakelen:

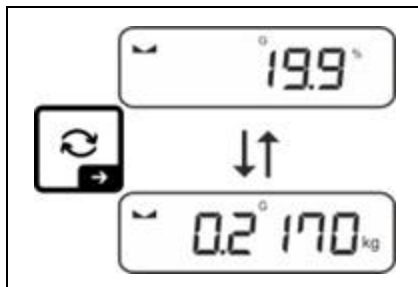

⇒ Met de toets  kan tussen actieve eenheid 1 en eenheid 2 worden omgeschakeld.

### Andere eenheid activeren:

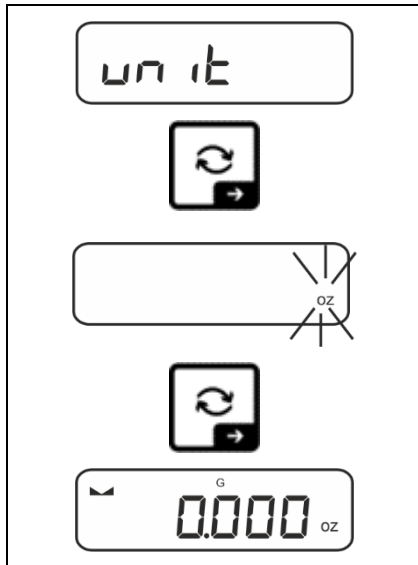


⇒ De menuinstelling < unit > kiezen en met de toets → bevestigen.


⇒ Afwachten totdat de nulaanduiding blinkt.


⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de weegeenheid kiezen en met de toets → bevestigen.

**i** Vereiste instellingen bij de keuze van een app (% , FFA) vermeld in het hoofdstuk 11.4.2 en 11.4.3.

### 9.5.2 Brutto waarde van de massa aflezen

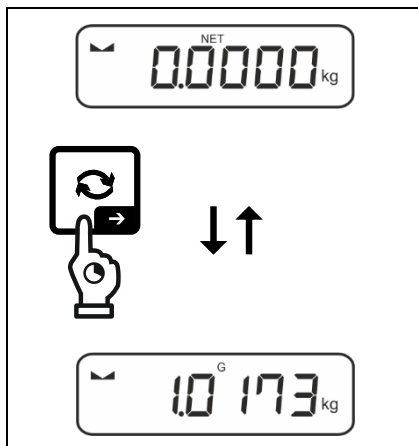Standaard is de schakeltoets zo  ingesteld om na het **indrukken en ingedrukt houden** van de toets het aflezen van de brutowaarde van de massa mogelijk zou zijn.



⇒ De toets  ingedrukt houden tot de aanduiding van de brutowaarde van de massa wordt afgelezen.

Na het loslaten van de toets blijft de waarde van het brutomassa nog enige tijd op het display afgelezen.

### 9.5.3 Instellingen van PRE-Tare functie openen

De **F** toets is standaard zo ingesteld dat door het **indrukken** van de toets de menuinstelling < P T A R E > wordt opgeroepen. Verdere instellingen, zie hoofdstuk 11.2.

### 9.5.4 Data-Hold functie uitvoeren

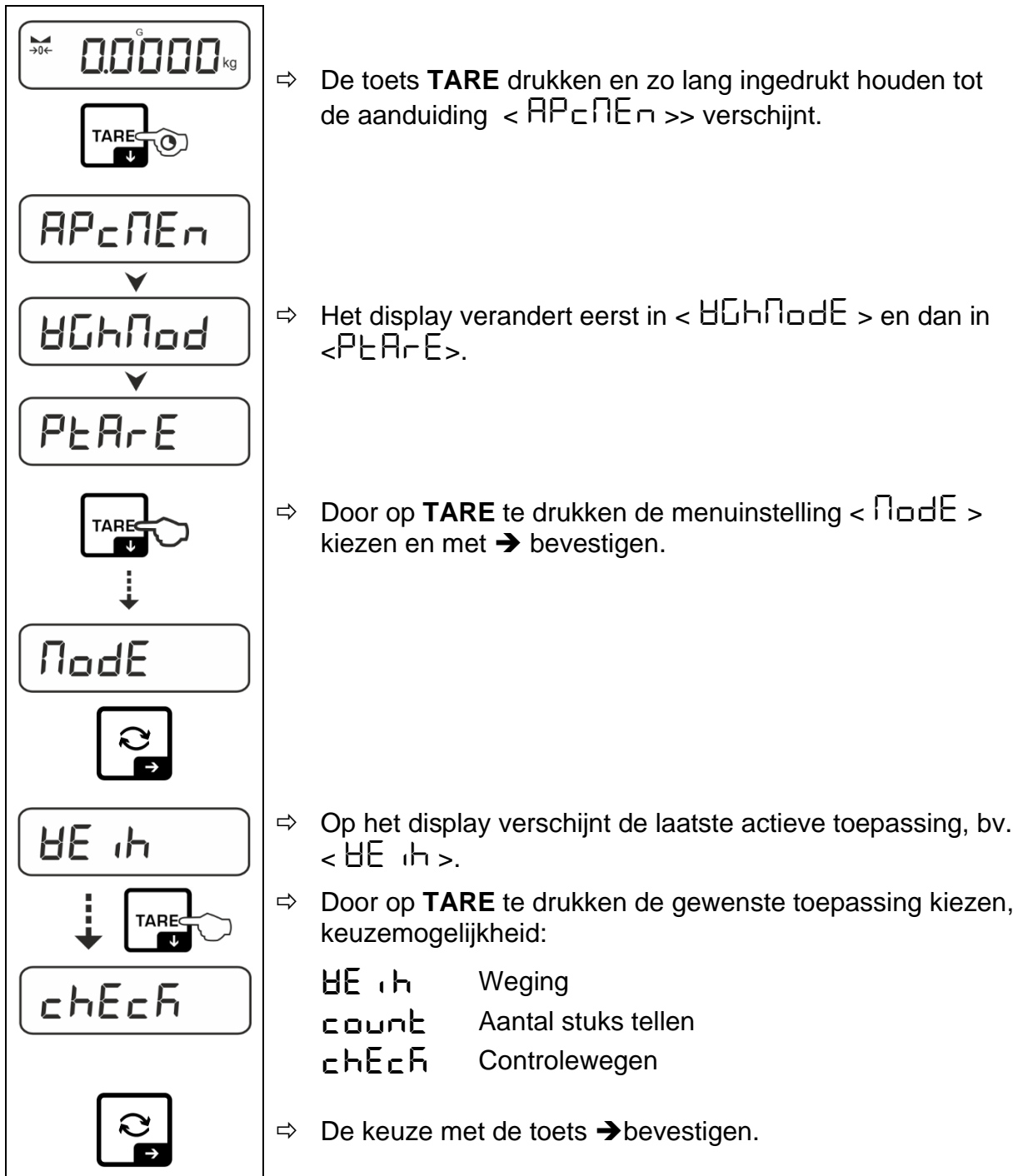
De **F** toets is standaard zo ingesteld dat door het **indrukken en ingedrukt houden** van de toets de menuinstelling Data-Hold < h o l d > wordt uitgevoerd, zie hoofdstuk 11.3.

## 10 Bedieningsconcept

De weegschaal wordt af fabriek geleverd met verschillende toepassingen (normaal wegen, controlewegen, optellen). Bij de eerste inschakeling staat de weegschaal in de toepassing <Wegen>.

Na inschakeling van de weegschaal kan echter de verdere werking ervan worden bepaald door de juiste toepassing in het **toepassing- menu** te kiezen (zie hoofdstuk 14.2). Of als standaard weegmodus of bv. de modus van controlewegen of de modus van het bepalen van het aantal stuks

### Keuze van de toepassing:



Afhankelijk van de geselecteerde toepassing worden alleen de toepassingsspecifieke instellingen in het toepassingsmenu weergegeven, het maakt mogelijk het doel snel en direct te bereiken.



- Informatie over de toepassingsspecifieke instellingen is te vinden in de beschrijving van de desbetreffende toepassing.
- Alle basisinstellingen en parameters die van invloed op de werking van de weegschaal zijn, zijn in **configuratiemenu** verzameld (zie hoofdstuk 14.3).  
Deze instellingen gelden voor alle toepassingen.
- Het aantal beschikbare toepassingen is van het model afhankelijk.

#### **Toepassing veranderen:**

- ⇒ Druk en houd de **TARE** toets ingedrukt tot het eerste menupunt van het configuratiemenu verschijnt.
- ⇒ Door op **↓** te drukken de gewenste menuinstelling **< Node >** kiezen en met **→** bevestigen. De huidige instelling wordt weergegeven.
- ⇒ Met **↓** de gewenste toepassing kiezen en met **→** bevestigen.



## 11 Toepassing <Wegen>

De uitvoering van gewoon wegen en tarreren is omschreven in hoofdstuk 9.2 of 9.4. Meer specifieke instellingsmogelijkheden zijn in de onderstaande hoofdstukken beschreven.

- i** Indien de toepassing <Wegen> nog niet actief is, de menuinstelling < **ModE** > ➔ < **WE ih** > kiezen, zie hoofdstuk 10.

### 11.1 Toepassings specifieke instellingen

#### Menu opvragen:

- ⇒ De toets **TARE** drukken en zo lang ingedrukt houden tot de aanduiding < **APcΠEπ** > verschijnt.
- ⇒ Het display verandert eerst in < **hOdhMod** > en dan in < **PRETARE** >.
- ⇒ Navigatie in het menu, zie hoofdstuk 14.1.

#### Overzicht (modellen zonder ijking):

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijving / hoofdstuk
<b>PRETARE</b> PRETARE	<b>ACTUAL</b>		Geplaatste massa als PRE-TARE overnemen, zie hoofdstuk 11.2.1
	<b>NUMERAL</b>		Tarra numeriek invoeren, zie hoofdstuk 11.2.2
	<b>CLEAR</b>		PRE-TARE waarde wissen
<b>hold</b>	-		Functie Hold activeren, zie hoofdstuk 11.3
<b>unit</b> Eenheden	beschikbare weegeenheden, hoofdstuk 1		Deze functie bepaalt in welke weegeenheid het resultaat wordt weergegeven, zie hoofdstuk 11.4.1.
	<b>pcs</b>		Toepassingseenheid "Tellen"
	<b>FFA</b>		Vermenigvuldigingsfactor, zie hoofdstuk 11.4.2
	<b>%</b>		Toepassingseenheid "Percentagewaarde bepalen", zie hoofdstuk 11.4.3
<b>ModE</b> Toepassingen	<b>WE ih</b>		Weging
	<b>count</b>		Aantal stuks tellen
	<b>check</b>		Controlewegen
			zie hoofdstuk 10

**Overzicht (modellen zonder ijking):**

<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Omschrijving / hoofdstuk</b>
PRE-TARE PRETARE	ACTUAL	Geplaatste massa als PRE-TARE overnemen, zie hoofdstuk 11.2.1	
	NUMERAL	Tarra numeriek invoeren, zie hoofdstuk 11.2.2	
	CLEAR	PRE-TARE waarde wissen	
hold	-	Functie Hold activeren, zie hoofdstuk 11.3	
unit Eenheden	g	Deze functie bepaalt in welke weegeenheid het resultaat wordt weergegeven, zie hoofdstuk 11.4.1.	
	kg		
MODE Toepassingen	WEIGH	Weging	zie hoofdstuk 10
	COUNT	Aantal stuks tellen	
	CHECK	Controlewegen	

## 11.2 PRE-Tare

### 11.2.1 Geplaatste massa als PRE-TARE overnemen






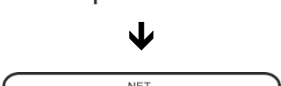


< P T A R E > → < A C T U A L >

	⇒	Plaats het weegreservoir.
	⇒	De menuinstelling < P T A R E > opvragen en met de toets → bevestigen.
	⇒	Om de massa van geplaatst gewicht als de PRE-TARE over te nemen met de navigatietoetsen ↓↑ de optie < A C T U A L > kiezen.
	⇒	Met de toets → bevestigen. Het wordt < H A I T > weergegeven.
	⇒	Het gewicht van het gewichtsreservoir wordt als tarragewicht opgeslagen. Er verschijnen: de nulaanduiding en < P T A R E > en < N E T >.
	⇒	Verwijder weegcontainer, het tarragewicht wordt met een negatief teken weergegeven.
	⇒	Plaats het weegcontainer op het weegschaalplateau.
	⇒	Afwachten tot de stabilisatieaanduiding (▢) wordt weergegeven.
	⇒	Het netto gewicht aflezen.

**i** De ingevoerde tarra is geldig tot de nieuwe tarra wordt ingevoerd. Om het te wissen de toets **TARE** drukken of de menuinstelling < C L E A R > bevestigen door op → te drukken.




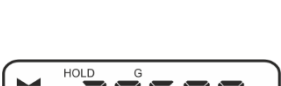
### 11.2.2 Bekende tarra numeriek invoeren

< P T A R E > → < N A R N U A L >

	⇒ De menuinstelling < P T A R E > opvragen en met de toets → bevestigen.
	
	⇒ Met de navigatietoetsen ↓ de instelling < N A R N U A L > kiezen en met de toets → bevestigen.
	
	⇒ De bekende tarra invoeren, het invoeren van numerieke waarden zie hoofdstuk 3.2.2, de actieve positie blinkt.
	
	⇒ Het ingevoerde gewicht wordt als tarragewicht opgeslagen, de aanduidingen <PTARE> en <NET> en het tarragewicht verschijnen met een negatief teken.
	⇒ Plaats het weegcontainer op het weegschaalplateau.
	⇒ Afwachten tot de stabilisatieaanduiding (▢) wordt weergegeven.
	⇒ Het netto gewicht aflezen.


**i** De ingevoerde tarra is geldig tot de nieuwe tarra wordt ingevoerd. Om het te wissen de nul waarde invoeren of de menuinstelling < CLEAR > bevestigen door op → te drukken.

### 11.3 Functie "Data Hold"

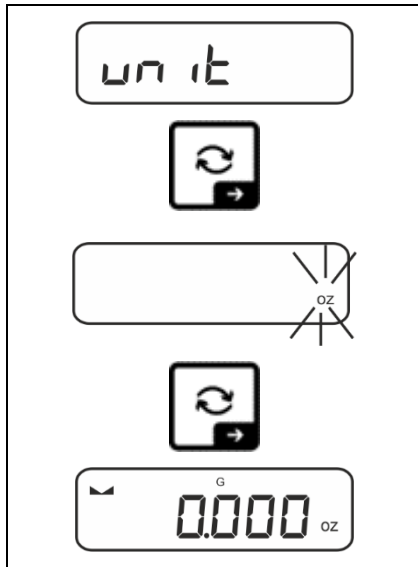	⇒ De menuinstelling < h o l d > kiezen.
	⇒ Het te wegen materiaal opleggen.
	⇒ Met de toets → bevestigen.
	
	⇒ De eerste stabiele gewichtswaarde wordt in de bovenste rand van het display door [HOLD] opgeslagen. Nadat de lading is verwijderd, blijft de waarde nog 10 seconden op het display staan.

## 11.4 Weegeenheden

### 11.4.1 De weegeenheid instellen




⇒ De menuinstelling < unit > kiezen en met de toets → bevestigen.

⇒ Afwachten totdat de nulaanduiding blinkt.

⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de weegeenheid kiezen en met de toets → bevestigen.

### **i**

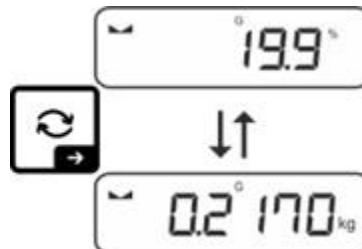
- Vereiste instellingen bij de keuze van een app (FFA, %) vermeld in het hoofdstuk 11.4.2 en 11.4.3.
- Met de toets ↻ (standaard instelling) is het mogelijk tussen de actieve eenheid 1 en eenheid 2 te schakelen (Standaard instelling van de toetsen, zie hoofdstuk 9.5. Overige instellingen, zie hoofdstuk 14.3.1).



### 11.4.2 Weging met vermenigvuldigingsfactor met een toepassing eenheid <FFA>

Hier wordt de factor bepaald waarmee het weegresultaat (in grammen) moet worden vermenigvuldigd.

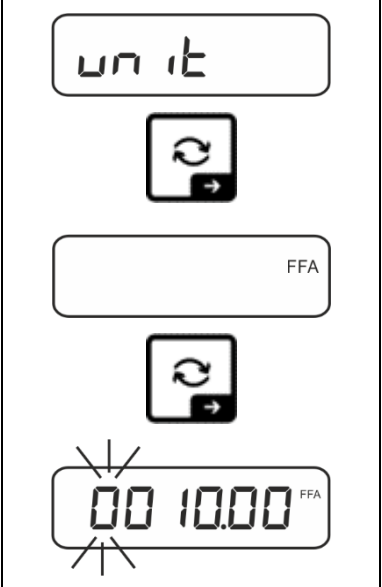
Hiermee kan bij de bepaling van de massa tegelijkertijd rekening worden gehouden met bijvoorbeeld een bekende foutfactor.



- ⇒ De menuinstelling < un it > kiezen en met de toets → bevestigen.
- ⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de instelling < FFA > kiezen en met de toets → bevestigen.
- ⇒ Vermenigvuldigingsfactor invoeren, het invoeren van numerieke waarden zie hoofdstuk 3.2.2, de actieve positie knippert.

### 11.4.3 Percentageweging met toepassing-eenheid <%>

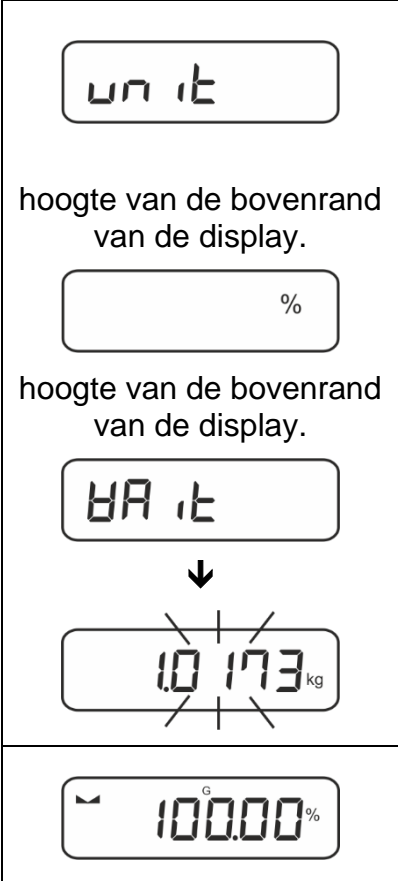Met de toepassing eenheid <%> is het mogelijk de massa van het monster te controleren als percentage van de referentiemassa.



- ⇒ De menuinstelling < un it > kiezen.
- ⇒ Het referentiegewicht plaatsen dat met 100% overeenkomt.
- ⇒ Met de toets → bevestigen.
- ⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de instelling < % > kiezen en met de toets → bevestigen.
- ⇒ De waarde met de toets → bevestigen.
- ⇒ Vanaf dat moment wordt het gewicht van het monster in procenten ten opzichte van de referentiemassa weergegeven.

## 12 Toepassing <Tellen>



Indien de toepassing <Aantal stuks tellen> nog niet actief is, kies dan de menuinstelling <MODE> → <COUNT>, zie hoofdstuk 10.

### 12.1 Toepassings specifieke instellingen

#### Menu opvragen:

- ⇒ De toets **TARE** drukken en zo lang ingedrukt houden tot de aanduiding <APCOPEN>> verschijnt.
- ⇒ De aanduiding verandert eerst in <COUNT> en dan in <REF>.
- ⇒ Navigatie in het menu, zie hoofdstuk 14.1.

#### Overzicht:

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijving / hoofdstuk
REF. Het aantal referentiestuks	5	Het aantal referentiestuks 5	
	10	Het aantal referentiestuks 10	
	20	Het aantal referentiestuks 20	
	50	Het aantal referentiestuks 50	
	FREE	Vrij gekozen, numeriek invoeren, zie hoofdstuk 3.2.2	
	input	De massa van een afzonderlijk onderdeel als een numerieke waarde invoeren zie hoofdstuk 3.2.2	
PRE-TARE PRETARE	ACTUAL	Geplaatste massa als PRE-TARE overnemen, zie hoofdstuk 11.2.1	
	NORMAL	Tarra numeriek invoeren, zie hoofdstuk 11.2.2	
	CLEAR	PRE-TARE waarde wissen	
TAREGET Doeltellen	VALUE	Telmodus	zie hoofdstuk 12.2.2
	ERRUPP	Bovenste tolerantie	
	ERRLOB	Onderste tolerantie	
	CLEAR	Instellingen wissen	
MODE Toepassingen	COUNT	Aantal stuks tellen	zie hoofdstuk 10
	CHECK	Controlewegen	
	WEIGH	Weging	

## 12.2 Toepassing gebruiken



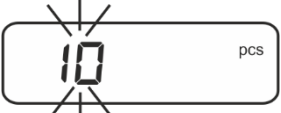




### 12.2.1 Stukken tellen

Vooraleer het mogelijk wordt om het aantal elementen met de weegschaal te bepalen, dient het afzonderlijke stukgewicht (het eenheidsgewicht) de zogenaamde referentiewaarde te worden bepaald. Daartoe moet een bepaald aantal van de te tellen onderdelen op de weegschaal worden gelegd. De weegschaal bepaalt het totale gewicht en wordt het vervolgens door aantal stuks zgn. aantal referentiestuks gedeeld. Vervolgens wordt, op grond van berekend afzonderlijk gewicht de bepaling van het aantal stuks uitgevoerd.

- i** • Hoe groter het aantal referentiestuks, hoe hoger de nauwkeurigheid van het tellen van het aantal stuks.
- Bij kleine en zeer verschillende elementen moet de referentiewaarde respectievelijk groot zijn.
- Minimale massa van getelde onderdelen, zie tabel "Technische gegevens"

#### 1. Referentiewaarde instellen

##### Aantal referentiestuks 5, 10, 20 of 50:

	⇒ Indien nodig een weegcontainer plaatsen en de weegschaal tarreren.
	⇒ Aantal gewenste referentiestuks opleggen.
	⇒ De menuinstelling < rEF > opvragen en met de toets → bevestigen.
	⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑, het aantal referentiestuks (5, 10, 20, 50) kiezen volgens de toegepaste referentie en met de toets → bevestigen.
	⇒ De weegschaal bepaalt het gemiddelde stukgewicht en toont vervolgens het aantal stuks.
	
	⇒ De referentiebelasting verwijderen. De weegschaal staat nu in de modus voor het tellen van stuks en telt alle stukken die op de weegplaat liggen.

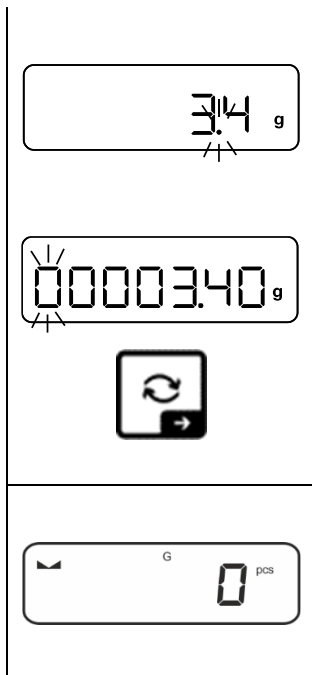


## Aantal van de door de gebruiker gedefinieerde referentiestuks:

	<p>⇒ Indien nodig een weegcontainer plaatsen en de weegschaal tarreren.</p>
	<p>⇒ Aantal gewenste referentiestuks opleggen.</p>
	<p>⇒ De menuinstelling &lt; rEF &gt; opvragen en met de toets → bevestigen.</p>
	<p>⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de instelling &lt; FrEE &gt; kiezen en met de toets → bevestigen.</p>
	<p>⇒ Het verschijnt een venster voor numerieke invoer. ⇒ Aantal referentiestuks invoeren en bevestigen, de waarde numeriek invoeren zie 3.2.2.</p>
	<p>⇒ De weegschaal bepaalt het gemiddelde stukgewicht en toont vervolgens het aantal stuks.</p>
	<p>⇒ De referentiebelasting verwijderen. De weegschaal staat nu in de modus voor het tellen van stuks en telt alle stukken die op de weegplaat liggen.</p>

## Tellen met vrij te kiezen massa van enkel onderdeel

	<p>⇒ De menuinstelling &lt; rEF &gt; opvragen en met de toets → bevestigen.</p>
	<p>⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de instelling &lt; inPut &gt; selecteren met de toets → bevestigen.</p>
	<p>⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de weegeenheid kiezen en met de toets → bevestigen.</p>




⇒ Met de navigatietoetsen  $\updownarrow$  de positie van de komma selecteren en met  $\rightarrow$  bevestigen.

⇒ Vermenigvuldigingsfactor invoeren, het invoeren van numerieke waarden zie hoofdstuk 3.2.2, de actieve positie knippert.

⇒ Met de toets  $\rightarrow$  bevestigen.

De weegschaal staat nu in de modus voor het tellen van stuks en telt alle stukken die op het weegplateau liggen.

## 2. Onderdelen tellen

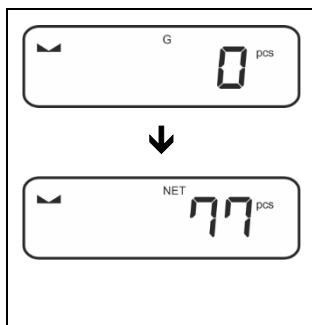

⇒ Indien nodig een weegcontainer plaatsen en de weegschaal tarreren.

⇒ De container met de te tellen onderdelen vullen. Het aantal stuks verschijnt direct op het display.

**i** Met de toets is het mogelijk tussen de aanduiding van het aantal stuks en de gewichtsaanduiding om te schakelen (standaardinstelling, zie hoofdstuk 9.5).






### 12.2.2 Doeltellen

Met toepassing <Doeltellen> is het mogelijk om materiaal te wegen naar het doelaantal stuks binnen een bereik van vastgestelde toleranties.

Wanneer het streefaantal stuk wordt bereikt, luidt een akoestisch signaal (voor zover in het menu geactiveerd) en een visueel signaal (tolerantieteken).

#### Optisch signaal:

De afgelezen tolerantietekens leveren de volgende informatie:

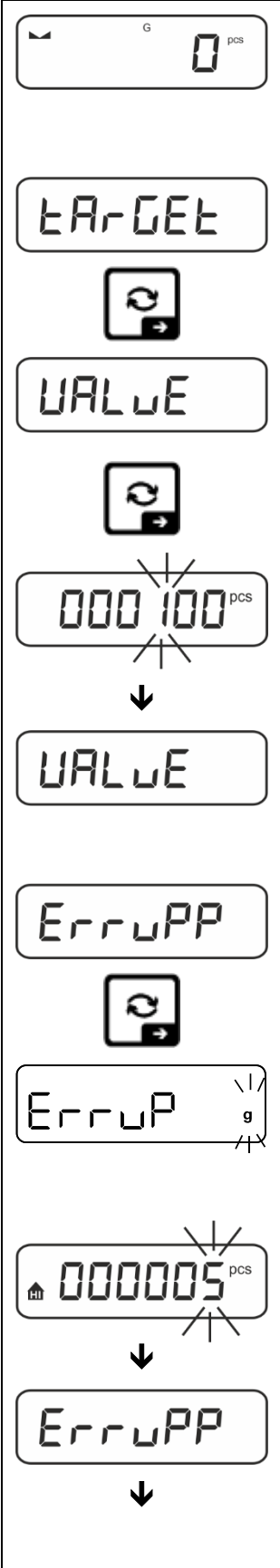
	Streefaantal stuks boven opgegeven tolerantie
	Streefaantal stuks binnen opgegeven tolerantie
	Streefaantal stuks onder opgegeven tolerantie


#### Akoestisch signaal:


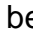
Het geluidssignaal is afhankelijk van de menu-instelling < SETUP → BEEPER >, zie hoofdstuk 14.3.1.

## Uitvoering:

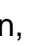
### 1. Streefaantal stuks en tolerantie definiëren

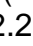


⇒ Zorg ervoor dat de weegschaal in de modus van het bepalen van het aantal stuks en het gemiddelde gewicht van een enkel stuk is gedefinieerd (zie hoofdstuk 12.2.1). Zo nodig met de toets  omschakelen.



⇒ Met de navigatietoetsen  de instelling < TARGET > kiezen en met de toets  bevestigen.



Er wordt de aanduiding < VALUE > weergegeven.

⇒ Met de toets  bevestigen, het wordt een venster voor numerieke invoer weergegeven. De actieve positie knippert.

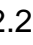
⇒ Voer het doelaantal stuks (invoeren van numerieke waarden zie hoofdstuk 3.2.2) en bevestig met .

De weegschaal wordt opnieuw naar het menu < VALUE > omgeschakeld.


⇒ Met de navigatietoetsen  de instelling < ERRUPP > selecteren met de toets  bevestigen.

⇒ Met de navigatietoetsen  de weegeenheid kiezen en met de toets  bevestigen.

⇒ Het verschijnt een venster voor numerieke invoer. De actieve positie knippert.

⇒ Voer de bovenste tolerantie in (invoeren van numerieke waarden zie hoofdstuk 3.2.2) en bevestig met .

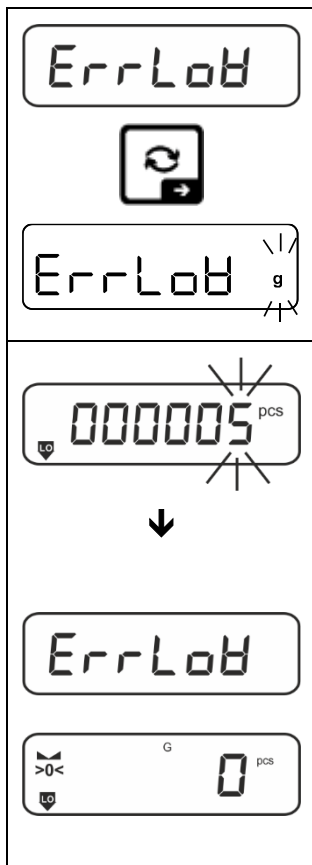De weegschaal wordt opnieuw naar het menu < ERRUPP > omgeschakeld.



- ⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de instelling < ErrLoB > selecteren met de toets → bevestigen.
- ⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de weegeenheid kiezen en met de toets → bevestigen.
- ⇒ Het verschijnt een venster voor numerieke invoer. De actieve positie knippert.
- ⇒ Voer de onderste tolerantie in (invoeren van numerieke waarden zie hoofdstuk 3.2.2) en bevestigen.
- ⇒ De weegschaal wordt opnieuw naar het menu < ErrLoB > omgeschakeld.
- ⇒ Om het menu te verlaten op ← meermaals drukken.

Na het instelwerk is de weegschaal klaar voor het doeltellen.

## 2. Tolerantiecontrole starten:

- ⇒ De gemiddelde massa van een enkel onderdeel bepalen, zie hoofdstuk 12.2.1.
- ⇒ Plaats het te wegen materiaal en controleer aan de hand van de tolerantie markeringen / het geluidssignaal of het te wegen materiaal binnen het ingestelde tolerantiebereik ligt.

Het te wegen materiaal onder de aangegeven tolerantie	Het te wegen materiaal binnen de aangegeven tolerantie	Het te wegen materiaal boven de aangegeven tolerantie

**i** De ingevoerde waarden zijn geldig tot het moment dat de nieuwe waarden worden ingevoerd.

Om de waarden te wissen de menuinstelling < tARGEt > → < cLEAR > kiezen en met → bevestigen.

## 13 De toepassing <Controlewegen>

**i** Indien de toepassing <Controlewegen> nog niet actief is, de menuinstelling < **Node** → **chEcH** > kiezen, zie hoofdstuk 10.

### 13.1 Toepassings specifieke instellingen

#### Menu opvragen:

- ⇒ De toets **TARE** drukken en zo lang ingedrukt houden tot de aanduiding < **APcNEr** >> verschijnt.
- ⇒ Het display verandert eerst in < **chFnOd** > en dan in < **tArGEt** >.
- ⇒ Navigatie in het menu, zie hoofdstuk 14.1.

#### Overzicht:

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijving / hoofdstuk
<b>tArGEt</b> Doelweging, zie hoofdstuk 13.2.1	<b>UAlUE</b>	Doelmassa, waarde numeriek invoeren, zie hoofdstuk 3.2.2	
	<b>ErruPP</b>	Bovenste tolerantie, waarde numeriek invoeren, zie hoofdstuk 3.2.2.	
	<b>ErrLoB</b>	Onderste tolerantie, waarde numeriek invoeren, zie hoofdstuk 3.2.2.	
	<b>cLEARr</b>	Instellingen wissen	
<b>L n tE</b> Controlewegen, zie hoofdstuk. 13.2.2	<b>L n uPP</b>	Bovenste grenswaarde, waarde numeriek invoeren zie hoofdstuk 3.2.2	
	<b>L n LoB</b>	De onderste grenswaarde, waarde numeriek invoeren zie hoofdstuk 3.2.2	
	<b>cLEARr</b>	Instellingen wissen	
<b>PtArE</b> PRE-TARE	<b>ActuAL</b>	Geplaatste massa als PRE-TARE overnemen, zie hoofdstuk 11.2.1	
	<b>nAnuAL</b>	Tarra numeriek invoeren, zie hoofdstuk 11.2.2	
	<b>cLEARr</b>	PRE-TARE waarde wissen	
<b>Node</b> Toepassingen	<b>WE ih</b>	Weegmodus	zie hoofdstuk 10
	<b>count</b>	Telmodus	
	<b>chEcH</b>	Controlemodus	

## 13.2 Toepassing gebruiken

### 13.2.1 Doelwegen

Met toepassing <Doelwegen> is het mogelijk om materiaal te wegen naar het doelaantal stuks binnen een bereik van vastgestelde toleranties.

Wanneer de doelmassa wordt bereikt, luidt een akoestisch signaal (voor zover in het menu geactiveerd) en een visueel signaal (tolerantieteken).

#### Optisch signaal:

De afgelezen tolerantietekens leveren de volgende informatie:

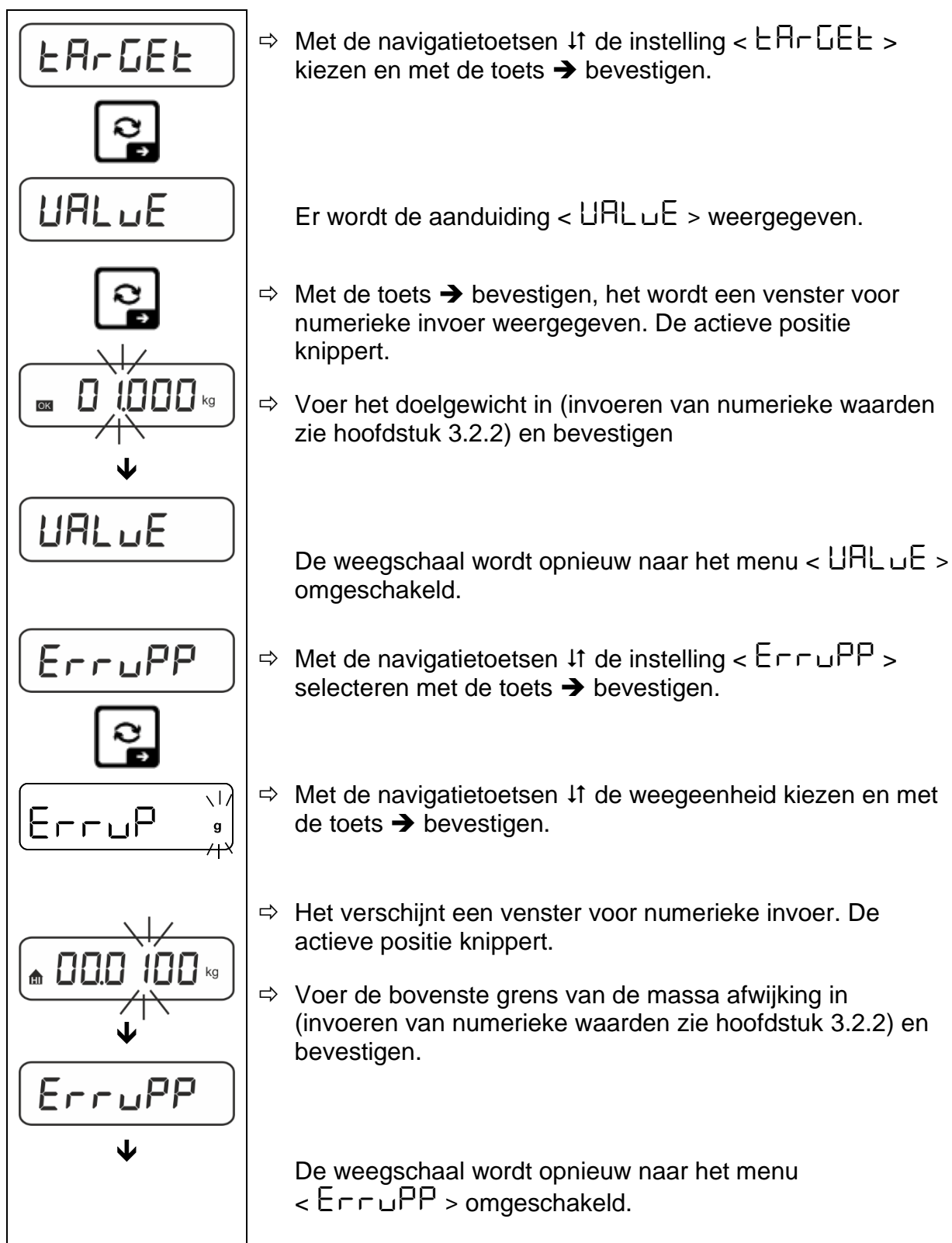
	Bovengrens
	Doelgewicht
	Ondergrens

#### Akoestisch signaal:

Het geluidssignaal is afhankelijk van de menu-instelling <SETUP → BEEPER>, zie hoofdstuk 14.3.1.

## Uitvoering:

### 1. Doelgewicht en tolerantie definiëren





	⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de instelling < ErrLoB > selecteren met de toets → bevestigen.
	⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de weegeenheid kiezen en met de toets → bevestigen.
	⇒ Het verschijnt een venster voor numerieke invoer. De actieve positie knippert. ⇒ Voer de onderste grens van de massa afwijking in (invoeren van numerieke waarden zie hoofdstuk 3.2.2) en bevestig.
	⇒ De weegschaal wordt opnieuw naar het menu < ErrLoB > omgeschakeld.
	⇒ Om het menu te verlaten op ← meermaals drukken.

Na het instelwerk is de weegschaal klaar voor het controlewegen.

### 3. Tolerantiecontrole starten:

- ⇒ Plaats het te wegen materiaal en controleer aan de hand van de tolerantie markeringen / het geluidssignaal of het te wegen materiaal binnen het ingestelde tolerantiebereik ligt.

Het te wegen materiaal onder de aangegeven tolerantie	Het te wegen materiaal binnen de aangegeven tolerantie	Het te wegen materiaal boven de aangegeven tolerantie

**i** De ingevoerde waarden zijn geldig tot het moment dat de nieuwe waarden worden ingevoerd.

Om de waarden te wissen de menuinstelling < tARGET > → < cLEAR > kiezen en met → bevestigen.




### 13.2.2 Controlewegen

Met de toepassing <Controlewegen> is het mogelijk om te controleren of het gewogen materiaal zich binnen het bepaalde tolerantiebereik bevindt.

Het overschrijden (of onderschrijden) van de grenswaarden wordt aangegeven door een visueel (tolerantietekens) en akoestisch signaal (indien geactiveerd in het menu).

#### Optisch signaal:

De afgelezen tolerantietekens leveren de volgende informatie:

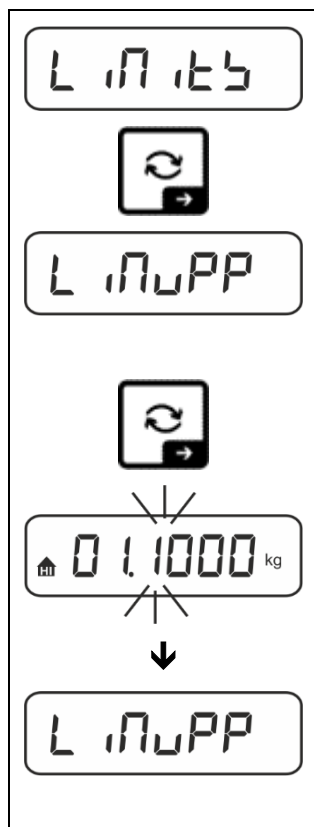
	Inwegen boven aangegeven tolerantie
	Inwegen binnen aangegeven tolerantie
	Inwegen onder aangegeven tolerantie

#### Akoestisch signaal:

Het geluidssignaal is afhankelijk van de menu-instelling < BEEP > → < BEEPER >, , zie hoofdstuk 14.3.1.

#### Uitvoering:

##### 1. Grenswaarden definiëren




⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de instelling < L 17.5 > kiezen en met de toets → bevestigen.

Het verschijnt < L 17.5PP >.

⇒ Met de toets → bevestigen, het verschijnt het venster voor het invoeren van de numerieke waarde voor het invoeren van de bovenste grenswaarde. De actieve positie knippert.

⇒ Voer de bovenste grenswaarde in (invoeren van numerieke waarden zie hoofdstuk 3.2.2) en bevestig met

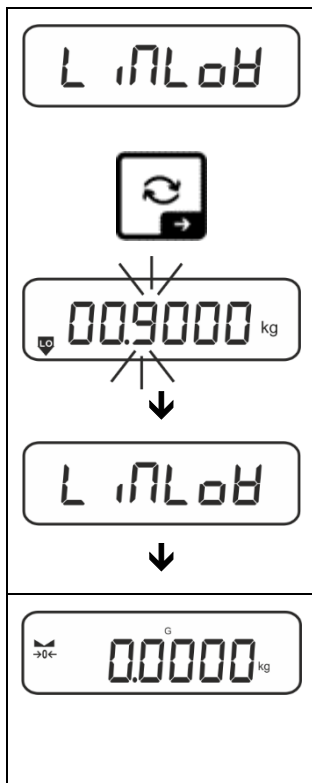De weegschaal wordt opnieuw naar het menu < L 17.5PP > omgeschakeld.



- ⇒ De instelling met de navigatietoetsen  $\updownarrow$  kiezen, de instelling < L 17LoB > kiezen.
- ⇒ Met de toets  $\rightarrow$  bevestigen, het verschijnt het venster voor het invoeren van de numerieke waarde voor het invoeren van de onderste grenswaarde. De actieve positie knippert.
- ⇒ Voer de onderste grenswaarde in (invoeren van numerieke waarden zie hoofdstuk 3.2.2) en bevestig met

De weegschaal wordt opnieuw naar het menu < L 17LoB > omgeschakeld.

- ⇒ Om het menu te verlaten op  $\leftarrow$  meermaals drukken.

Na het instelwerk is de weegschaal klaar voor het controlewegen.

## 2. Tolerantiecontrole starten:

- ⇒ Plaats het te wegen materiaal en controleer aan de hand van de tolerantie markeringen / het geluidssignaal of het te wegen materiaal binnen het ingestelde tolerantiebereik ligt.

Het te wegen materiaal onder de aangegeven tolerantie	Het te wegen materiaal binnen de aangegeven tolerantie	Het te wegen materiaal boven de aangegeven tolerantie


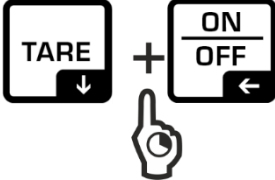
**i** De ingevoerde waarden zijn geldig tot het moment dat de nieuwe waarden worden ingevoerd.

Om de waarden te wissen de menuinstelling < L 17LoB >  $\rightarrow$  < CLEAR > kiezen en met  $\rightarrow$  bevestigen.

## 14 Menu

### 14.1 Navigatie in het menu

#### Menu opvragen:

Toepassingsmenu	Configuratiemenu
	
De toets <b>TARE</b> drukken en ingedrukt houden tot het eerste menupunt verschijnt.	Tegelijk op <b>TARE</b> en <b>ON/OFF</b> drukken en ingedrukt houden tot het eerste menupunt verschijnt.

#### Parameters selecteren en instellen:

<b>Op één niveau scrollen</b>	Gebruik de navigatietoetsen om bepaalde menublokken achter elkaar te selecteren. Blader vooruit met de navigatietoets ↓. Blader achteruit met de navigatietoets ↑.
<b>Menupunt activeren / selectie bevestigen</b>	Navigatietoets → drukken.
<b>Terug naar het vorige menuniveau / terug naar de weegmodus</b>	Navigatietoets ← drukken.

### 14.2 Menu van de toepassing

Met het menu van de toepassing is het snelle en gerichte toegang tot een geselecteerde toepassing mogelijk (zie hoofdstuk 10).



Overzicht van de toepassingsspecifieke instellingen is in de beschrijving van elke toepassing vervat.

### 14.3 Configuratiemenu

In het configuratiemenu is het mogelijk de weegschaalinstellingen / het bedrijf van de weegschaal aan eigen vereisten (bv. omgevingsomstandigheden, speciale weegprocessen) aan te passen.

Deze instellingen zijn globaal en onafhankelijk van de geselecteerde toepassing (uitgezonderd < bUttOnb >).

#### 14.3.1 Overzicht configuratiemenu <bEtUP>

Overzicht (modellen zonder ijking):

Niveau 1	Niveau 2	Overige niveaus / beschrijving	
		Beschrijving	
cAL Justeren	cALEHt	→ Extern justeren, zie hoofdstuk 7.8.1	
	cALEud	→ Extern justeren door de gebruiker gedefinieerd, zie hoofdstuk 7.8.2	
	GrAAdu	→ Constante van de zwaartekracht op het justeerpunt zie hoofdstuk 7.8.3	
	GrAubE	→ Constante van de zwaartekracht op het justeerpunt zie hoofdstuk 7.8.4	
coA Communicatie	r5232 ↓ ubb-d	bAud	600
			1200
			2400
			4800
			9600
			14400
			19200
			38400
			57600
			115200
			128000
		256000	
		dAtA	7db t5
			8db t5
		PAR t5	nonE
			odd
			EUEr
		5toP	15b t5
			25b t5
hAnd5h	nonE		
Protoc	fcP		

Pr int Gegevensuit voer	intFce		rs232	Interface RS232*			
			usb-d	Interface USB*			
			WLAN	Interface WLAN* * enkel met KUP aansluiting			
	sua		on	Optelmodus inschakelen/uitschakelen, zie hoofdstuk 15.3.1			
			off				
	PrNode	trig	MANUAL	on, off Gegevensoverdracht nadat de knop <b>PRINT</b> wordt gedrukt. zie hoofdstuk15.3.2			
			AutoPr	on, off Automatische gegevensoverdracht bij stabiele en positieve weegwaarde, zie hoofdstuk 15.3.3. Opnieuw uitvoeren nadat nulaanduiding en stabilisatie worden afgelezen, afhankelijk van instellingen < TRANGE > keuzemogelijkheid: <b>(off, 1, 2, 3, 4, 5)</b> . < TRANGE > bepaalt de factor voor <i>d</i> . De factor vermenigvuldigd met <i>d</i> bepaalt de drempel waarboven de waarde niet langer als stabiel geldt.			
			cont	off	Continue gegevensuitvoer		
				on	SPEED	Cyclus voor gegevensuitvoer instellen: zie hoofdstuk 15.3.4	
					ZERO	on, off 0 (onbelast) ook continu uitvoeren	
					STABLE	on, off Alleen stabiele waarden uitvoeren	
	WEIGHT		SGLPrt		on, off	Weergegeven gewichtswaarde uitvoeren	
			GntPrt		Gross	on, off	
					net	on, off	
					tare	on, off	
					Format	Long (uitgebreid meetprotocol) Short (standaard meetprotocol)	
	LAYOUT		none		on, off Standaard layout		
			user		Model	on, off De modelnaam van de weegschaal uitvoeren	
					Serial	on, off Het serienummer van de weegschaal uitvoeren	
					AL id	Alibi geheugen- identificatie uitvoeren	
					date	Gegevensuitvoer	
					time	Tijd uitvoeren	
					reset	no	

			4E5	Instellingen wissen		
bEEPEr Geluidsignaal	REY5	oFF	Aan-/uitzetten akoestisch signaal nadat de toets is ingedrukt			
		on				
	chEcH	ch-of	oFF	Akoestisch signaal uit		
			5LoB	Langzaam		
			5Ed	Standaard		
			FA5t	Snel		
		cont.	Continu			
		ch-Lo	oFF	Akoestisch signaal uit		
			5LoB	Langzaam		
			5Ed	Standaard		
			FA5t	Snel		
		cont.	Continu			
		ch-hi	oFF	Akoestisch signaal uit		
			5LoB	Langzaam		
	5Ed		Standaard			
FA5t	Snel					
cont.	Continu					
AutoFF Automatisch uitschakelen bij bedrijf met accuvoeding	noDE	oFF	Functie van automatisch uitschakelen uit			
		Auto	Automatische uitschakeling van de weegschaal na de in het menu ingestelde tijd < t nE > zonder wijziging van de belasting of bij gebrek aan bediening			
		onLYD	Automatisch uitschakelen alleen bij nulaanduiding			
	t nE	305	Automatische uitschakeling van de weegschaal na ingestelde tijd zonder wijziging van de belasting of bij het niet bedienen van het apparaat			
		1n in				
		2n in				
		5n in				
		30n in				
	60n in					

<b>buttonb</b> Toetsenvaststelling	<b>F-KEY</b> ⇕ <b>CHANGE</b>	<b>SPush</b> ⇕ <b>LPush</b>	<b>default</b>	Standaard instellingen, zie hoofdstuk9.5
			<b>off</b>	Toets gedeactiveerd
			<b>unit</b>	Instelling wegeenheid, zie hoofdstuk11.4.1
			<b>mode</b>	Toepassing kiezen, zie hoofdstuk 10
			<b>hold</b>	HOLD functie uitvoeren, zie hoofdstuk9.5.4
			<b>PRE</b>	Instellingen van PRE-Tare functie openen, zie hoofdstuk 11.2
			<b>REF</b>	Instelling aantal referentiestuks, zie hoofdstuk 12.2.1 * enkel voor toepassing <Aantal stuks tellen>
			<b>LIMIT</b>	Instellingen controletellen openen, zie hoofdstuk 13.2.2 * enkel voor toepassing <Controlewegen>
	<b>TARGET</b>	Instellingen doeltellen openen, zie hoofdstuk 13.2.1 * enkel voor toepassing <Controlewegen>		
<b>BLIGHT</b> Verlichte achtergrond	<b>mode</b>	<b>ALWAYS</b>	Verlichte achtergrond van de display permanent aan	
		<b>timer</b>	Automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting na de in het menu ingestelde tijd < timer > zonder wijziging van de belasting of bij het niet bedienen van het apparaat	
		<b>noBL</b>	Verlichte achtergrond van de display permanent uit	
	<b>timer</b>	<b>5s</b>	Bepaal na hoeveel tijd de achtergrondverlichting automatisch wordt uitgeschakeld als de belasting niet wordt gewijzigd of niet bediend.	
		<b>10s</b>		
		<b>30s</b>		
		<b>1min</b>		
<b>2min</b>				
<b>5min</b>				
<b>30min</b>				



ᑲᑲᑲᑲᑲ Tarrerebereik	100% ↕ 10%	Definitie van het maximale tarrabereik, mogelijk om 10% - 100% te selecteren. De waarde numeriek invoeren, zie hoofdstuk 3.2.2.	
ᑲᑲᑲᑲᑲ Nul aanhouden	on	Automatisch nul aanhouden [ $\leq 3d$ ]	
	off	<b>i</b>	Indien de hoeveelheid gewogen materiaal enigszins verminderd of vergroot wordt, kan het in de weegschaal geplaatste "compensatie- en stabilisatiemechanisme" foutieve weegresultaten laten aflezen! (bv. de vloeistof vloeit langzaam van de container uit die op de weegschaal is geplaatst, damprocessen.)  Tijdens doseren met kleine gewichtsschommelingen is het aanbevolen om deze functie uit te zetten.
ᑲᑲᑲ ᑲᑲᑲ Datum en tijd	ᑲᑲᑲ	-2022-	Jaar invoeren
	ᑲᑲᑲᑲᑲᑲ	12-31	Maand en dag invoeren
	ᑲ ᑲᑲᑲᑲ	2359.59	Tijd invoeren (uur, minuut, seconde)
ᑲᑲ ᑲᑲ Eenheden	beschikbare weegeenheden / toepassingseenheden, hoofdstuk 1	on, off	Met deze functie wordt bepaald welke gewichtseenheden beschikbaar moeten zijn in het menu van bepaalde toepassing < ᑲᑲ ᑲᑲ >. In het menu van bepaalde toepassing zijn de eenheden beschikbaar waarvoor de instelling < on > is gekozen.
ᑲᑲᑲᑲ Toepassingen	ᑲᑲ ᑲᑲ	Weging	
	count	Aantal stuks tellen	
	ᑲᑲᑲᑲ	Controlewegen	
ᑲᑲᑲᑲᑲ	De weegschaal naar de fabrieksinstellingen terugzetten		

## Modellen met ijking

Niveau 1	Niveau 2	Overige niveaus / beschrijving	
		Beschrijving	
com Communicatie	r5232 ⊕ v5b-d	bAud	600
			1200
			2400
			4800
			9600
			14400
			19200
			38400
			57600
			115200
			128000
			256000
		dAtA	7db it5
			8db it5
		PAR it5	nonE
			odd
			EUEn
		5toP	15b it
			25b it5
		hAnd5h	nonE
Protoc	fcP		

Print Gegevensuitvoer	interface		rs232	Interface RS232*			
			usb-d	Interface USB*			
			wlan	Interface WLAN* * enkel met KUP aansluiting			
	sum		on	Optelmodus inschakelen/uitschakelen, zie hoofdstuk 15.3.1			
			off				
	Printmode	trigger	MANUAL	on, off Gegevensoverdracht nadat de knop <b>PRINT</b> wordt gedrukt. zie hoofdstuk 15.3.2			
			AutoPr	on, off Automatische gegevensoverdracht bij stabiele en positieve weegwaarde, zie hoofdstuk 15.3.3. Opnieuw uitvoeren nadat nulaanduiding en stabilisatie worden afgelezen, afhankelijk van instellingen < RANGE > keuzemogelijkheid: <b>(off, 1, 2, 3, 4, 5)</b> . < RANGE > bepaalt de factor voor <i>d</i> . De factor vermenigvuldigd met <i>d</i> bepaalt de drempel waarboven de waarde niet langer als stabiel geldt.			
			cont	off	Continue gegevensuitvoer		
				on	SPEED	Cyclus voor gegevensuitvoer instellen: zie hoofdstuk 15.3.4	
					Zero	on, off 0 (onbelast) ook continu uitvoeren	
	Weight		SGLPrt		on, off	Weergegeven gewichtswaarde uitvoeren	
			GntPrt		Gross	on, off	
					Net	on, off	
					tare	on, off	
					Format	Long (uitgebreid meetprotocol) Short (standaard meetprotocol)	
	Layout		none		on, off	Standaard layout	
			user		Model	on, off De modelnaam van de weegschaal uitvoeren	
					Serial	on, off Het serienummer van de weegschaal uitvoeren	
					AL id	Alibi geheugen-identificatie uitvoeren	
					date	Gegevensuitvoer	
					time	Tijd uitvoeren	
	reset	no	Instellingen worden niet gewist				

			4E5	Instellingen wissen		
bEEPEr Geluidsignaal	REY5	oFF	Aan-/uitzetten akoestisch signaal nadat de toets is ingedrukt			
		on				
	chEcH	ch-of	oFF	Akoestisch signaal uit		
			5LoB	Langzaam		
			5Ed	Standaard		
			FA5t	Snel		
		cont.	Continu			
		ch-Lo	oFF	Akoestisch signaal uit		
			5LoB	Langzaam		
			5Ed	Standaard		
			FA5t	Snel		
		cont.	Continu			
		ch-hi	oFF	Akoestisch signaal uit		
			5LoB	Langzaam		
	5Ed		Standaard			
FA5t	Snel					
cont.	Continu					
AutoFF Automatisch uitschakelen bij bedrijf met accuvoeding	NoDE	oFF	Functie van automatisch uitschakelen uit			
		Auto	Automatische uitschakeling van de weegschaal na de in het menu ingestelde tijd < t <sub>NE</sub> > zonder wijziging van de belasting of bij gebrek aan bediening			
		onLYD	Automatisch uitschakelen alleen bij nulaanduiding			
	t <sub>NE</sub>	305	Automatische uitschakeling van de weegschaal na ingestelde tijd zonder wijziging van de belasting of bij het niet bedienen van het apparaat			
		1n in				
		2n in				
		5n in				
		30n in				
	60n in					

<b>buttonb</b> Toetsenvaststelling	<b>F-KEY</b> ⇕ <b>CHANGE</b>	<b>SPush</b> ⇕ <b>LPush</b>	<b>default</b>	Standaard instellingen, zie hoofdstuk9.5
			<b>off</b>	Toets gedeactiveerd
			<b>unit</b>	Instelling weegeenheid, zie hoofdstuk11.4.1
			<b>mode</b>	Toepassing kiezen, zie hoofdstuk 10
			<b>hold</b>	HOLD functie uitvoeren, zie hoofdstuk9.5.4
			<b>PRE</b>	Instellingen van PRE-Tare functie openen, zie hoofdstuk 11.2
			<b>REF</b>	Instelling aantal referentiestuks, zie hoofdstuk 12.2.1 * enkel voor toepassing <Aantal stuks tellen>
			<b>LIMIT</b>	Instellingen controletellen openen, zie hoofdstuk 13.2.2 * enkel voor toepassing <Controlewegen>
	<b>TARGET</b>	Instellingen doeltellen openen, zie hoofdstuk 13.2.1 * enkel voor toepassing <Controlewegen>		
<b>BLIGHT</b> Verlichte achtergrond	<b>mode</b>	<b>ALWAYS</b>	Verlichte achtergrond van de display permanent aan	
		<b>timer</b>	Automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting na de in het menu ingestelde tijd < timer > zonder wijziging van de belasting of bij het niet bedienen van het apparaat	
		<b>noBL</b>	Verlichte achtergrond van de display permanent uit	
	<b>timer</b>	<b>5s</b>	Bepaal na hoeveel tijd de achtergrondverlichting automatisch wordt uitgeschakeld als de belasting niet wordt gewijzigd of niet bediend.	
		<b>10s</b>		
		<b>30s</b>		
		<b>1min</b>		
<b>2min</b>				
<b>5min</b>				
<b>30min</b>				

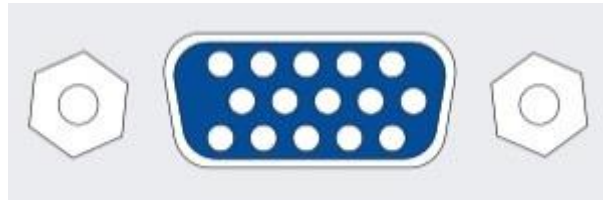
<b>ᐃᐱᑲ ᐱᑦ</b> Datum en tijd	<b>ᑭᑲᑲ</b>	-2022-	Jaar invoeren
	<b>ᐃᐱᑲᐱᐱ</b>	12-31	Maand en dag invoeren
	<b>ᑲ ᐱᐱᐱ</b>	2359.59	Tijd invoeren (uur, minuut, seconde)
<b>ᑭᐱ ᐱᑲ</b> Eenheden	beschikbare weegeenheden / toepassingseen- heden, hoofdstuk 1	<b>ᐱᐱ, ᐱᑲᑲ</b> Met deze functie wordt bepaald welke gewichtseenheden beschikbaar moeten zijn in het menu van bepaalde toepassing < ᑭᐱ ᐱᑲ >. In het menu van bepaalde toepassing zijn de eenheden beschikbaar waarvoor de instelling < ᐱᐱ > is gekozen.	
<b>ᐱᐱᐱᑲ</b> Toepassingen	<b>ᑲᑲ ᐱᐱ</b>	Weging	
	<b>ᑲᐱᑭᑲ</b>	Aantal stuks tellen	
	<b>ᑲᑲᑲᑲ</b>	Controlewegen	
<b>ᑲᑲᑲᑲ</b>	De weegschaal naar de fabrieksinstellingen terugzetten		

## 15 Communicatie met randapparatuur via KUP aansluiting

Door de interfaces is het mogelijk om de weegresultaten met de aangesloten randapparatuur te delen.

De overdracht kan geschieden naar een printer, computer of controleaanduidingen. Omgekeerd kunnen hiermee besturingsopdrachten worden gegeven en de gegevens via aangesloten apparaten worden ingevoerd.

De weegschalen zijn standaard uitgerust met een KUP aansluiting (KERN Universal Port).



KUP aansluiting

Alle beschikbare KUP interface adapters zijn bereikbaar in onze webshop op:

<http://www.kern-sohn.com>

## 15.1 KERN Communications Protocol (interfaceprotocol van KERN)

Via het KCP-systeem kunnen vele parameters en apparaat functies worden opgeroepen en gecontroleerd. KERN-eenheden met KCP kunnen gemakkelijk worden aangesloten op computers, industriële besturingen en andere digitale systemen. Een gedetailleerde beschrijving is te vinden in de handleiding "KERN Communications Protocol", beschikbaar in het downloadgedeelte op onze KERN-website ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)).

Om KCP te activeren, zie het menuoverzicht in de gebruiksaanwijzing van de weegschaal.

Het KCP-protocol baseert op gewone commando's en antwoorden in ASCII-formaat. Elke interactie bestaat uit een commando, eventueel met argumenten gescheiden door spaties en afgesloten met <CR><LF>.

De door de weegschaal ondersteunde KCP-commando's kunnen worden opgevraagd door het commando "I0" gevolgd door CR LF te sturen.

Overzicht van de meest gebruikte KCP commando's:

<b>I0</b>	Toon alle geïmplementeerde KCP protocol commando's
<b>S</b>	Stuur stabiele waarde
<b>SI</b>	Huidige waarde (ook onstabiel) verzenden
<b>SIR</b>	Huidige waarde (ook onstabiel) verzenden en herhalen
<b>T</b>	Tarreren
<b>Z</b>	Op nul zetten

Voorbeeld:

<b>Opdracht</b>	S	
<b>Mogelijke antwoorden</b>	S_ S_.....100.00_g S_l S_+ or S_-	Commando geaccepteerd, uitvoering van het commando is begonnen Een ander commando wordt momenteel uitgevoerd, timeout bereikt. Overbelasting of onderbelasting



## 15.2 Alibi geheugen van KERN

Bij geijkt wegen onder wettelijk toezichtdoor een aangesloten computer (bv. het afdrucken van een leveringsbron vanaf de computer in plaats van direct op een op de weegschaal aangesloten printer), wordt in het kader van consumentenbescherming op basis van de IJkwet een elektronische archivering op een geijkt geheugen aanbevolen die het manipuleren van de gegevens voorkomt. De opgeslagen records kunnen te allen tijde worden opgeroepen en op een aangesloten computer weergegeven.

- Het Alibi-geheugen kan tot 250.000 weegresultaten opslaan. Als het geheugen vol is, worden eerder gebruikte identificaties overschreven (te beginnen met de eerste identificatie).
- De opslagprocedure kan worden uitgevoerd door op de Print toets te drukken, alsook door het "S" of "MEMPRT" commando van het KCP protocol te gebruiken.
- Er worden opgeslagen: weegwaarde (N, G, T), datum en tijd, alsook de unieke identificatiecode van het Alibi - geheugen.
- Bij de gegevensoverdracht wordt ter identificatie ook een unieke Alibi-geheugenidentificatie verstuurd.
- De opgeslagen gegevens kunnen met het commando "MEMQID" van het KCP-protocol worden opgeroepen. Het is een vraag mogelijk om een specifieke afzonderlijke identificator of een reeks identificatoren.
- Voorbeeld:
  - o MEMQID 15 → Er wordt een record met identificatienummer 15 teruggestuurd.
  - o MEMQID 15 20 → Er worden alle records teruggestuurd die onder de identificatienummers 15 tot en met 20 zijn opgeslagen.

Een gedetailleerde beschrijving is te vinden in de handleiding "KERN Communications Protocol", beschikbaar in het downloadgedeelte op onze KERN-website ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)).

<b>i</b>	<p>Bescherming van wettelijk relevante opgeslagen gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nadat een record is opgeslagen, wordt het onmiddellijk afgelezen en per byte gecontroleerd. Als er een fout wordt ontdekt, wordt de record als ongeldig gemarkeerd. Als er geen fout wordt ontdekt, kan het record indien nodig worden afgedrukt.</li><li>- Bij elke record wordt een controlesom gevoegd.</li><li>- Alle informatie op de afdruk worden afgelezen uit het geheugen met de verificatie van de controlesom in plaats van rechtstreeks uit de buffer.</li></ul> <p>Maatregelen om gegevensverlies te voorkomen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bij het aanzetten is het geheugen beschermd tegen opslaan.</li><li>- Vooraleer een record in het geheugen wordt opgeslagen, wordt procedure voor toestemming tot opslaan uitgevoerd.</li><li>- Nadat een record is opgeslagen, wordt een procedure voor de bescherming tegen opslaan uitgevoerd (vóór verificatie).</li></ul>
----------	---

- De opslagtijd van de gegevens in het geheugen is meer dan 20 jaar.
--

## 15.3 Functies voor gegevensoverdracht

### 15.3.1 Optelmodus < 100 >

Met deze functie is het mogelijk om de afzonderlijke weegwaarden aan het optelgeheugen met de toets toe te voegen en deze na het aansluiten van de optionele printer te drukken.

#### Functie activeren:

- ⇒ In het configuratiemenu de instelling < Pr inE > → < 100 > opvragen en met → bevestigen.
- ⇒ Met de navigatietoetsen ↓ de instelling < 00 > selecteren met de toets → bevestigen.
- ⇒ Om het menu te verlaten op de navigatietoets ← herhaaldelijk drukken.



Voorwaarde: menu-instelling

< Pr ModE > → < tr 0 > → < ANNUAL > → << 00 >

#### Het te wegen materiaal optellen:

- ⇒ Indien nodig op de weegschaal een lege container plaatsen en de weegschaal tarreren.
- ⇒ Het te wegen materiaal plaatsen. Afwachten tot de stabilisatieaanduiding (▲▲) verschijnt en vervolgens de toets PRINT drukken. Het display verandert in < 100 1 > en daarna in de huidige gewichtswaarde. De gewichtswaarde wordt opgeslagen en naar de printer gestuurd. Het verschijnt Σ. Het gewogen materiaal afnemen.
- ⇒ Het andere te wegen materiaal opleggen. Afwachten tot de stabilisatieaanduiding (▲▲) verschijnt en vervolgens de toets PRINT drukken. Het display verandert in < 100 2 > en daarna in de huidige gewichtswaarde. De gewichtswaarde wordt opgeslagen en naar de printer gestuurd. Het gewogen materiaal afnemen.
- ⇒ Voeg aan de som de massa van het volgende gewogen materiaal volgens de hierboven beschreven stappen.
- ⇒ De procedure kan willekeurig aantal keren worden herhaald totdat het weegbereik van de weegschaal wordt gebruikt.

#### De som "Total" weergeven en uitvoeren:

- ⇒ Druk de toets **PRINT** en houd ingedrukt. Het verschijnen: aantal wegingen en totaal gewicht.  
Het totale geheugen is gewist; het symbool [Σ] verdwijnt.

**Protocolsjabloon (KERN YKB-01N):**

Instelling van het menu

< PrNode > → < BE iGht > → < GntPrt > → < ForNAt > → < Short >

No.			1	←	PRINT	Eerste weging
N:	S S	1.9993	kg			
T:		0.0000	kg		PRINT	
G:		1.9993	kg			
C:		1.9993	kg			
No.			2	←		Tweede weging
N:	S S	0.9992	kg			
T:		0.0000	kg		PRINT	
G:		0.9992	kg			
C:		2.9985	kg			
No.			3	←		Derde weging
N:	S S	0.4992	kg			
T:		0.0000	kg		PRINT	
G:		0.4992	kg			
C:		3.4977	kg			
No.			3	←		Aantal wegingen/ totaal
C:		3.4977	kg			

**Protocolsjabloon (KERN YKB-01N):**

Instelling van het menu

< PrNode > → < BE iGht > → < SCLPrt > → < on >

No.			1	←	PRINT	Eerste weging
C:	200.0	g				
No.			2	←	PRINT	Tweede weging
C:	500.0	g				
No.			3	←	PRINT	Derde weging
C:	400.0	g				
No.			4	←	PRINT	Vierde weging
C:	1100.0	g				
No.			4	←		Aantal wegingen/ totaal
C:	1200.4	g				
No.			4	←	PRINT	
C:	1200.4	g				

### 15.3.2 Gegevensoverdracht nadat **PRINT** < ΠΑΝΩΡΛ > wordt ingedrukt

#### Functie activeren:

- ⇒ Selecteer in het configuratiemenu de menu-instelling < Πρ ιητ > → < Πρ ιοδΕ > → < Ερ ιϋ > en bevestig met de toets →.
- ⇒ Voor handmatige gegevensuitvoer met de navigatietoetsen ↓↑ de menu-instelling < ΠΑΝΩΡΛ > selecteren en met de toets → bevestigen.
- ⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de instelling < οη > selecteren met de toets → bevestigen.
- ⇒ Om het menu te verlaten op de navigatietoets ← herhaaldelijk drukken.

#### Gewogen materiaal opleggen:

- ⇒ Indien nodig op de weegschaal een lege container plaatsen en de weegschaal tarreren.
- ⇒ Het te wegen materiaal opleggen. De gewichtswaarde wordt overgedragen nadat op **PRINT** wordt gedrukt.

### 15.3.3 Automatische gegevensoverdracht < AUTO >

De gegevensoverdracht vindt automatisch plaats zonder op de **PRINT** toets te drukken, mits aan de relevante overdrachtsvoorwaarden is voldaan, afhankelijk van de instelling in het menu.

#### Activeren van de functie en instellen van de overdrachtsvoorwaarde:

- ⇒ Selecteer in het configuratiemenu de menu-instelling < PRINT > → < PRINT MODE > → < AUTO > en bevestig met de toets →.
- ⇒ Voor automatische gegevensuitvoer met de navigatietoetsen ↓↑ de menu-instelling < AUTO > selecteren en met de toets → bevestigen.
- ⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de instelling < ON > selecteren met de toets → bevestigen. Het verschijnt < CONFIRM >.
- ⇒ Met de toets → bevestigen en met de navigatietoetsen ↓↑ de gewenste overdrachtsvoorwaarde instellen.
- ⇒ Met de toets → bevestigen.
- ⇒ Om het menu te verlaten op de navigatietoets ← herhaaldelijk drukken.

#### Gewogen materiaal opleggen:

- ⇒ Indien nodig op de weegschaal een lege container plaatsen en de weegschaal tarreren.
- ⇒ Plaats het gewogen materiaal en wacht op het stabilisatie-aanduiding (▲▲). De weegwaarde wordt automatisch overgedragen.

### 15.3.4 Continue gegevensuitvoer < CONT >

#### Activeren van de functie en instellen van de overdrachtscyclus:

- ⇒ Selecteer in het configuratiemenu de menu-instelling < PRINT > → < PRINT MODE > → < AUTO > en bevestig met de toets →.
- ⇒ Om continu gegevens over te dragen met de navigatietoetsen de menuinstelling < CONT > kiezen en met de toets → bevestigen.
- ⇒ Met de navigatietoetsen ↓↑ de instelling < ON > selecteren met de toets → bevestigen.
- ⇒ Er wordt de aanduiding < SPEED > weergegeven.
- ⇒ Bevestigen door op → te drukken en met de navigatietoetsen ↓↑ de gewenste cyclus instellen (waarden numeriek invoeren zie hoofdstuk 3.2.2).
- ⇒ Gegevens uitvoer < ZERO > i < TABLE > instellen.
- ⇒ Om het menu te verlaten op de navigatietoets ← herhaaldelijk drukken.

#### Gewogen materiaal opleggen

- ⇒ Indien nodig op de weegschaal een lege container plaatsen en de weegschaal tarreren.
- ⇒ Het te wegen materiaal opleggen.

⇒ De weegwaarden zijn volgens de vastgestelde cyclus verzonden.

**Protocolsjabloon (KERN YKB-01N):**

S D	1.9997	kg
S D	1.9999	kg
S D	1.9999	kg
S D	1.9999	kg
S S	2.0000	kg
S S	2.0000	kg
S S	2.0000	kg
S S	2.0000	kg
S D	1.9998	kg
S D	1.9998	kg
S D	2.0002	kg
S D	2.4189	kg
S D	2.9998	kg
S D	2.9996	kg
S D	2.9996	kg
S D	2.9997	kg
S D	2.9997	kg
S S	2.9996	kg
S S	2.9996	kg

**15.4 Gegevensformaat**

- ⇒ Selecteer in het configuratiemenu de menuinstelling <Print> ⇒ <PrintMode> ⇒ <Short> ⇒ <Print> en bevestig met de toets →.
- ⇒ Met de navigatietoetsen ↑ de instelling <Format> kiezen en met de toets → bevestigen.
- ⇒ De gewenste instelling met de navigatietoetsen ↓ kiezen.  
Keuzemogelijkheid:  
  - <Short> standaard meetprotocol
  - <Long> uitgebreid meetprotocol
- ⇒ De instellingen met de toets → bevestigen.
- ⇒ Om het menu te verlaten op de navigatietoets ← herhaaldelijk drukken.

**Protocolsjabloon (KERN YKB-01N):**

Format → Short			Format → Long		
N:	S S	2.0000 kg	N:	S D	2.0000 kg
T:		0.5000 kg	Tara weight after x:		0.5000 kg
G:		2.5000 kg	Gross weight:		2.5000 kg

## 16 Onderhoud, werkprestatie, verwijderen



Ontkoppel het apparaat van de bedrijfsspanning voordat met onderhoud, reiniging of reparatiewerkzaamheden wordt gestart.

### 16.1 Reinigen

Men dient geen agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken (oplosmiddel, e.d.) maar het apparaat enkel met een doekje reinigen met lichte zeeploog. De vloeistof mag het toestel niet binnendringen. Met een droog, zacht doekje vegen.

Losse monsterrestanten / poeder kan men voorzichtig met een kwast of handstofzuiger verwijderen.

Gemorst gewogen materiaal onmiddellijk verwijderen.

### 16.2 Onderhoud, werkprestatie

⇒ Het apparaat moet door geschoolde en door de firma KERN gemachtigde onderhoudstechnici worden bediend en onderhouden.

⇒ Vóór het openen van het netwerk scheiden.

### 16.3 Verwijderen

De verwijdering van de verpakking en het apparaat moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende nationale of regionale wetgeving van de plaats van gebruik.

## 17 Hulp bij kleine storingen

Bij storingen van programmaverloop dient de weegschaal kort te worden uitgeschakeld en van netwerk gescheiden. Vervolgens moet het weegproces opnieuw worden gestart.

### Storing

### Mogelijke oorzaak

Gewichtsaanduiding licht niet op.

- De weegschaal is niet ingeschakeld.
- De verbinding met het net is onderbroken (netkabel niet aangesloten/defect).
- Gebrek aan netwerkspanning.

Gewichtsaanduiding verandert continu.

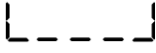
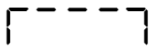
- Tocht / luchtbewegingen.
- Trillingen van de tafel / vloer.
- Het weegschaalplateau is in contact met vreemde lichamen.
- Elektromagnetische velden/ statische ladingen (andere instellingsplaats kiezen - indien mogelijk de toestellen die storingen veroorzaken, uitzetten).

Weegresultaat is duidelijk verkeerd

- De weegschaal staat niet op nul.
- Onjuist justeren.
- De schaal is niet waterpas.
- Er zijn sterke temperatuurschommelingen.
- De opwarmingstijd is niet in acht genomen.
- Elektromagnetische velden/ statische ladingen (andere opstellingsplaats kiezen - indien mogelijk de toestellen die storingen veroorzaken, uitzetten).



## 18 Foutmeldingen

<b>Foutmelding</b>	<b>Verklaring</b>
<b>zlimit</b>	<b>Nulstelbereik overschreden (naar boven)</b>
<b>UnderZ</b>	<b>Het nulbereik overschreden (naar beneden)</b>
<b>instab</b>	<b>Onstabiele belasting</b>
<b>wrong</b>	<b>Justeerfout</b>
	<b>Onderbelasting</b>
	<b>Overbelasting</b>
<b>Lo Bat</b>	<b>Uitgeputte batterij/accucapaciteit</b>